




- **Manipulation et Contention**

Capacité à attraper par la peau du cou et à maintenir au niveau des épaules

Simulateur (rat) de formation éthique

Réf. RT001

Martin Heath MSc, FIAT, FIScT, R.AnTech, PTLLS and Sandra Batty MIAT

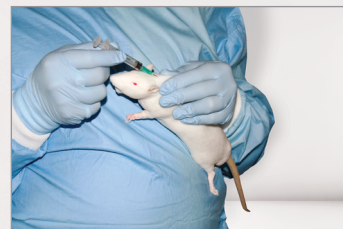

- **Peau auto-obturante**

Puce électronique et administration sous-cutanée



- **Administration orale**

Tête mobile permettant un positionnement correct pour l'administration orale via cathéter dans l'œsophage et l'estomac.

Réduire l'utilisation des animaux, acquérir des compétences Le simulateur d'entraînement CurVet™ pour rats offre une alternative éthique et réaliste à l'utilisation de rongeurs vivants à des fins de formation et d'enseignement. Les techniciens animaliers, les vétérinaires et les scientifiques peuvent tous utiliser ce simulateur de remplacement.

Mise en œuvre des 3R

Queue amovible – référence de remplacement : RT001B

- **Remplacement** – Élimine la nécessité d'euthanasier un animal pour acquérir des compétences
- **Réduction** – Peut diminuer le besoin de surproduire des animaux vivants pour les besoins de la
- **Raffinement** – Permet de s'exercer et de perfectionner les compétences techniques



Administration intramusculaire

Les membres postérieurs fixés au bassin permettent le mouvement.



Administration intraveineuse et prélèvement sanguin

Injection, prélèvement sanguin, queue réaliste avec deux veines accessibles, matériau auto-obturant et queue amovible.

7

Caractéristiques

- Peau dermatologique réaliste
- Tête rotative
- Colonne vertébrale et membres postérieurs mobiles
- Queue réaliste et amovible
- Poids corporel d'environ 300 g
- Réservoir pour le sang
- Traits réalistes : yeux, pattes, bouche, dents, palais dur et orifice anal



Orifice anal

Pour thermomètre rectal avec profondeur d'insertion limitée