




Gestion de la température

Tapis chauffant sur mesure

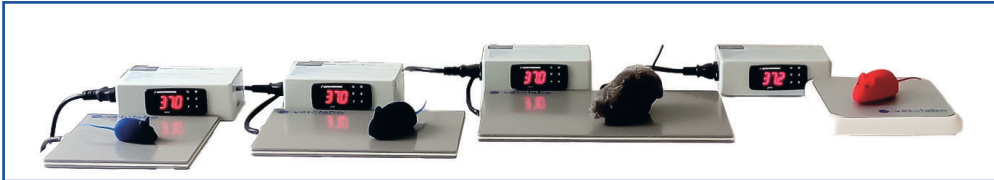

Références
VL1 40x30x1cm
VL2 17x17x1cm
VL3 32x18x1cm
VL4 25x10x1cm
VL5 25x15x1cm

La température corporelle des animaux peut varier en fonction de l'anesthésie, de la durée et du type de chirurgie. Une hypothermie, peut entraîner des complications postopératoires telles que des infections, des saignements, une mauvaise cicatrisation ou une dépression respiratoire. Pour éviter ces risques, il est important de maintenir la température des animaux à 37°C pendant un acte chirurgical. Cela permet de préserver le confort, le bien-être et la sécurité des animaux, ainsi que de favoriser un réveil plus doux et une récupération plus rapide.


Lampe chauffante IR



Référence
VETE02041250T

Existe en différents supports (Articulé et sur pied) Lampe 250w

Tapis chauffant à commande numérique

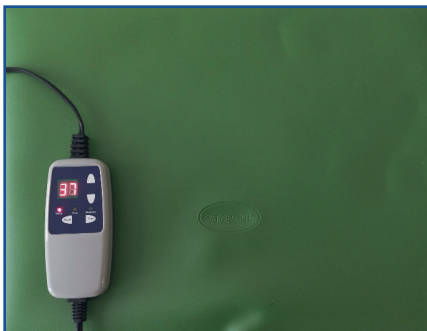


Référence
VET 8365936

Spécifications : Tapis chauffant à commande numérique

- Matériau : plastique HIPS résistant
- Surface : panneau en aluminium anodisé (optionnel selon la version)
- Température de fonctionnement : entre 16°C et 50°C
- 230 volts CE

Ce Tapis chauffant dispose d'une gamme de réglages de chaleur allant de 35°C à 45°C.

Tapis Chauffant sur Mesure pour Interventions sur Grands Animaux

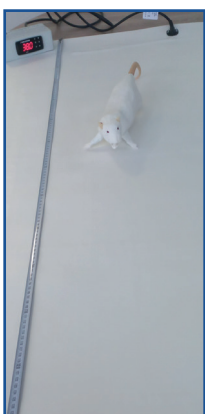

Référence
VL-7
Dimensions : 120x60x0.3cm

Tapis Semi-Flexible Chauffant

Tapis chauffant à commande numérique fabriqué à partir silicone. Ce modèle possède une commande numérique déporté, permettant de régler la température selon les besoins spécifiques.

Equipé d'un grand afficheur numérique, vous pourrez facilement surveiller la température réelle du tapis et vous assurer qu'elle reste constante. La plage de température de fonctionnement de ce tapis est comprise entre 16 degrés Celsius (°C) et 50 degrés Celsius (°C). La puissance est de 300w - 230 VAC CE

Des dimensions personnalisées peuvent être réalisées sur demande, n'hésitez pas à nous contacter.

Unité Thermique avec R trocontr le 4 canaux



R f rence
VETTC204

Syst me de R chauffement et Monitoring Thermique   4 voies pour Souris, Rats, Lapins et Chats

Le maintien de la temp rature corporelle et la surveillance en temps r el des variations de temp rature rectale sont essentiels pour garantir la stabilit  des signes vitaux pendant et apr s une intervention chirurgicale sur de petits animaux. Le dispositif de r chauffement pour animaux VETTC204 r pond parfaitement   ces exigences. Con u pour les animaux de petite et moyenne taille, tels que les souris, les rats, les lapins et les chats, il est largement pl biscit  dans les universit s, les  coles de m decine et les instituts de recherche. Dot  d'un  cran LCD, d'une pr cision accrue, d'un contr le de temp rature fiable, ainsi que d'un design compact et  l gant, le

VETTC204 allie efficacit  et faible encombrement.

Chaque sortie peut avoir une couverture de taille diff rente, et les quatre tapis peuvent  tre contr l s et ajust s individuellement.

Note : La configuration standard inclut l'unit  de contr le, le coussin chauffant (120x205mm), la sonde de temp rature pour souris (1.515mm) et le cordon d'alimentation.

N�	Item N�	Model	Name	Description	Quantit�	Remarks
1	36-0004	TC204	Small Animal Warner	Four channels	1 unit	Standard
2	36-2001		Temp�rature Probe	�1,5x15mm	2pcs	Standard
3	36-2002		Temp�rature Probe	�2x30mm		Optionnel
4	36-2014		Heating Pad	120x205mm, 12V, 35W	2pcs	Standard
5	36-2013		Heating Pad	70x100mm, 12V, 8W		Optionnel
6	36-2005		Heating Pad	150x250mm, 12V, 15W		Optionnel
7	36-2006		Heating Pad	400x600mm, DC 12V, 40W		Optionnel
8	36-2007		Heating Pad	300x500mm, DC 12V, 40W		Optionnel
9	36-2008		Heating Pad	300x500mm, DC 12V, 50W		Optionnel
10	36-2009		Heating Pad	120x400mm, DC 12V, 40W		Optionnel

Carat�ristique	Description
Fonctionnalit�	affiche simultan�ment la temp�rature r�gl�e du coussin chauffant et la temp�rature rectale. - Chauffage � r�troaction automatique.
	Contr�le de 1 � 4 canaux, pour r�chauffer 1 � 4 animaux ind�pendamment. - Mode : coussin chauffant (Pad) et sonde de temp�rature (Probe).
	Prend en charge les unit� �C et �F. - Limite de temp�rature d�finissable. - D�tection du d�tachement de la sonde de temp�rature.
R�glage de la temp�rature	10~50�C pour le coussin chauffant, -30~60�C pour l'environnement op�rationnel.
R�solution	0,1�C
Pr�cision	�0,1�C
Sonde de temp�rature	Dimensions : 1,5x15mm (d'tandard), c�ble de 1mm
Coussin chauffant	Dimensions : 120x205mm (d'tandard), c�ble de 1mm
Alimentation	Entr�e : 110-220V, 50/60Hz ; Sortie : 24V
Poids	Dimensions de l'unit� principale : 180x150x110mm Poids : 2,5kg
P�riode de garantie	3ans



Unité de régulation de la température corporelle (2 voies)



Références
69020 - 12x20.5cm (sonde incluse)
69026 - 9x17cm (sonde incluse)
69027 7x10cm (sonde incluse)

Ce système permet de contrôler la température de l'animal en ajustant automatiquement la chaleur délivrée par le tapis en fonction de la température corporelle mesurée par la sonde rectale.

Il est utilisé pour des opérations chirurgicales, la stéréotaxie et le réveil post-chirurgie

Caractéristiques clés :

- Écran tactile : Interface couleur conviviale.
- Sonde rectale : Conception flexible pour une insertion aisée.
- Coussin chauffant : Flexibilité et facilité de nettoyage.
- Variété de tailles : Coussins chauffants disponibles en plusieurs dimensions.
- Coussin isolant : Sépare thermiquement le coussin chauffant de la surface opératoire, minimisant ainsi les déperditions thermiques et optimisant l'efficacité.
- Accessoires et pièces de rechange : Un large éventail d'accessoires et de pièces de rechange est disponible pour ce système. Consultez le catalogue pour plus de détails.

Chambres de récupération post-opératoires

Chambres de récupération pour petits animaux



Référence
VB5

Dimensions : Externe H490 x L320 x P250mm
Interne H390 x L270 x P195mm



Référence
VB4

Dimensions : Externe H500 x L560 x P325 mm
Interne H400 x L 500 x P280mm

Conçu pour faciliter la récupération et les soins postopératoires des petits animaux. La température de l'air interne peut être surveillée au moyen d'un affichage à LED. Le ventilateur de circulation d'air est également contrôlé par l'opérateur pour permettre une flexibilité totale.

Système de soins postopératoires pour rats et souris



Référence
VET36-0051
Dimensions : 310 x 290 x 150mm
230 VOLTS CE

Ce système de conservation de la chaleur est idéal pour les soins postopératoires des rats et des souris. Il utilise un circuit d'eau à température constante pour chauffer la table en métal, associée à une boîte transparente ventilée. Ce dispositif assure un chauffage rapide et une température homogène, offrant un environnement de récupération optimal grâce à un flux d'air constant.

Les rembourrages et coussinets chirurgicaux, fixables à la table inférieure de la boîte, absorbent efficacement l'urine et les excréments des animaux. La boîte est à la fois fixe et amovible, avec un couvercle verrouillable pour un entretien sûr et un nettoyage rapide.

Capacité d'accueil :

- Plus de 3 rats
- Plus de 20 souris

Ce système garantit des soins postopératoires efficaces et sécurisés pour vos petits animaux.
Spécification : Plage de contrôle de la température 20-65 °

Banc chauffant pour cages rongeurs



Existe aussi en version 16 cages

Références

VETHE013A

Cette version du banc est entièrement équipée d'un système de chauffage qui couvre 100% de la surface de l'étagère.

VETHE013

Cette variante du banc offre une fonction de chauffage partiel, où seulement 50% de la surface de l'étagère est chauffée. Cela permet aux animaux de choisir de se reposer loin de la source de chaleur directe s'ils le désirent.

Dimensions : 802x400x319 mm

Ce banc chauffant à une seule étagère, s'ajoute à notre large gamme de produits chauffants.

Plage de température 40°C maximum

- La longueur totale de l'objet est de 802 mm, ce qui inclut le panneau de contrôle.
- La longueur qui peut être utilisée pour placer les cages est de 627 mm
- La largeur disponible pour accueillir les cages est de 400 mm
- Le banc a une hauteur de 319 mm

Ce banc chauffant offre une solution idéale et pratique pour maintenir une chaleur constante jusqu'à 3 cages pour vos espaces restreint.

Cette approche garantit un environnement confortable pour vos petits compagnons, tout en minimisant l'espace requis.

- Peu Encombrant : Sa conception compacte permet de l'installer facilement sur un plan de travail, sans encombrer votre espace.
- Peut accueillir jusqu'à 3 cages
- Chaleur constante surveillée (Commande numérique permettant de régler la température constante du banc).
- Pratique se pose sur un plan de travail.
- Personnalisable
- Comprend un écran de protection en plexiglas rouge

Enceintes Chauffantes Modulaire 4 Compartiments Modèles Souris et Rat



Référence
VETO11AR

Deux modèles conçus pour le confort thermique optimal des rongeurs en laboratoire ou en clinique vétérinaire. Identiques en fonctionnalités, ils se distinguent uniquement par leurs dimensions adaptées à l'espèce ciblée.

Caractéristiques communes :
Modularité : 4 compartiments distincts pour accueillir plusieurs animaux.
Contrôle thermique : Régulation précise via thermocouple à distance et écran LCD.
Ventilation interne : 2 ventilateurs assurant une chaleur homogène.
Matériau : Perspex transparent ou rouge, facile à nettoyer.
Accessoires inclus : Thermo-hygromètre numérique pour suivi température/humidité.
Plage de température : Réglable de 32°C à 41°C.
Disponible transparent ou rouge



Référence
VETHE011R

Référence	Largeur	Profondeur	Hauteur	Sujet	Couleur
VET011R	425mm	523mm	228mm	RAT	Rouge
VET011AR	430mm	342mm	109/180mm	SOURIS	Rouge