

## Tondeuse aspirante pour poils d'animaux, 323 x 168 x 264 mm,

### Boîte à poussière 2,5 L, tondeuse-aspirateur blanche

Référence VET65288

Ce modèle est conçu pour offrir un maximum de sécurité et de confort à votre animal. La machine est équipée d'un système de réduction du bruit, avec un niveau sonore inférieur à 50 dB.

La puissance d'aspiration maximale de 13000 Pa garantit une efficacité optimale, tandis que les 3 niveaux d'aspiration réglables permettent d'adapter l'intensité selon les besoins spécifiques.

- 3 niveaux d'aspiration réglables
- Niveau sonore <50 dB

#### Résumé des caractéristiques

Type d'alimentation : Sans batterie, ni batterie incluse

Capacité : 2,5 litres

Couleur : Blanc

Dimensions : 323 × 160 × 266 mm


Longueur du câble : 2,5 mètres

Longueur du tuyau : 1,6 mètre


Matériau principal : ABS (Acrylonitrile butadiène styrène)

Niveau sonore : 50 dB(A) — fonctionnement silencieux

Puissance : 350 watts

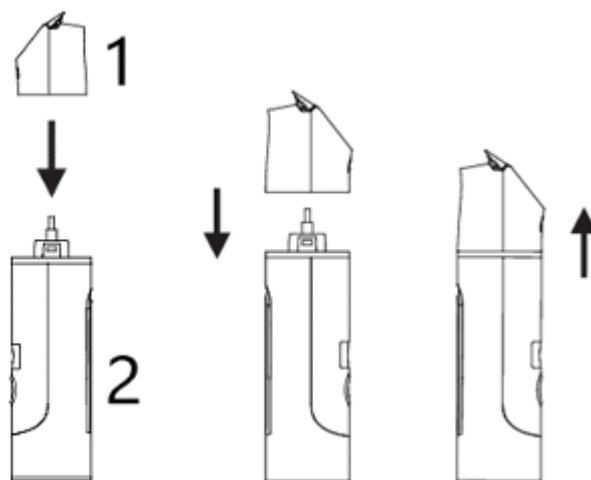

Appuyez sur le bouchon pour ouvrir le bac à poussière et vider les poils

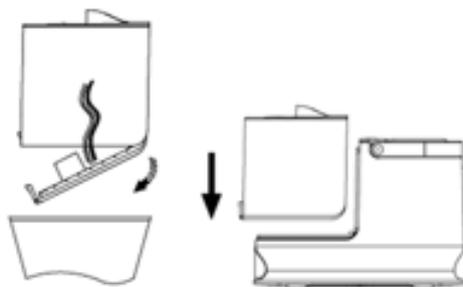


Remettez le bac à poussière en place dans le sens de la flèche.

*Nettoyage de la tondeuse*

1. Retirez la tête de coupe.



2. Retirez la saleté de l'orifice d'aspiration.

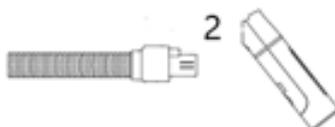

| N° | Dénomination          |
|----|-----------------------|
| 1  | Tête du dispositif    |
| 2  | Support de l'appareil |

3. Versez le lubrifiant dans la tête de coupe.

