

1 20 01 15 2 P



Les aiguilles chirurgicales SMI sont fabriquées à partir des meilleures grades d'acier inoxydable afin de garantir des performances exceptionnelles, combinant une ductilité et un moment de flexion excellente. Une technologie avancée de revêtement en silicone de l'aiguille assure une pénétration en douceur afin de réduire le traumatisme tissulaire du patient. La forme du corps de l'aiguille est conçue de manière à permettre le maximum de stabilité dans le porte-aiguille.

5/8 CERCLE

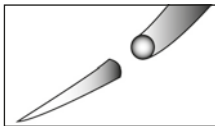
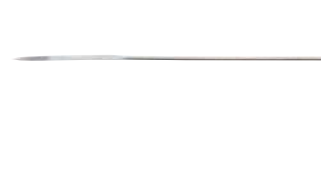
1/2 CERCLE

3/8 CERCLE

1/4 CERCLE


J-NEEDLE

DROITE




AIGUILLE RONDE

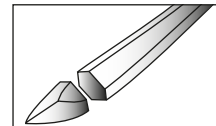Un corps rond qui s'affine graduellement vers la pointe.




AIGUILLE SPATULÉE

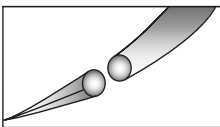Aiguille avec deux côtés tranchants.




AIGUILLE RONDE À POINTE TRANCHANTE

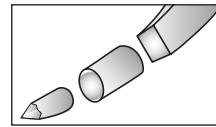Un corps rond se réduisant en pointe effilée, tranchante.




AIGUILLE CORONAIRE

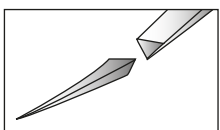Une pointe minutieuse suivie d'un corps rond et un corps principal rectangulaire pour une meilleure pénétration dans le tissu cardio-vasculaire.




AIGUILLE TRIANGULAIRE TRANCHANT EXTÉRIEUR

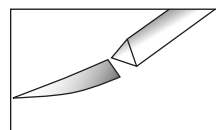Un corps triangulaire offre un troisième bord tranchant à la courbure convexe externe.




AIGUILLE TRIANGULAIRE CONVENTIONNELLE TRANCHANT INTÉRIEUR

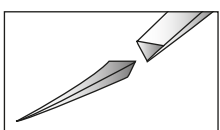Un corps triangulaire offre un troisième bord tranchant à la courbure concave interne.



AIGUILLE EASY PASS

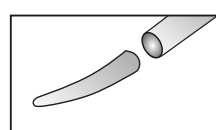Pointe de précision avec tranchant extraordinaire.




AIGUILLE ÉMOUSSÉE

Aiguille cylindrique avec pointe arrondie. Pour les tissus mous tels que foie et reins. Réduction des risques de blessures accidentelles.

- ✓ *Tranchante et forte*
- ✓ *Passage aisé*
- ✓ *La même sensation qu'au premier passage à chaque passage*

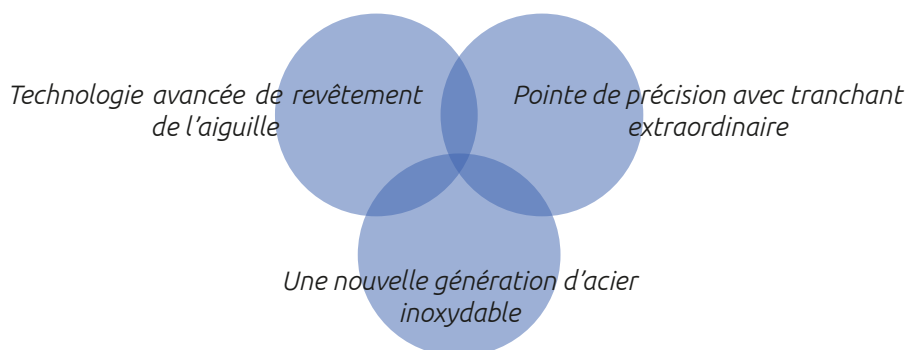L'aiguille Easy Pass combine 3 technologies de pointe vers une aiguille de précision de première qualité:



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Pointe de précision avec tranchant extraordinaire
- ✓ Une nouvelle génération d'acier inoxydable
- ✓ Technologie avancée de revêtement de l'aiguille
Revêtement en silicone couvre l'ensemble de l'aiguille chirurgicale

AVANTAGES

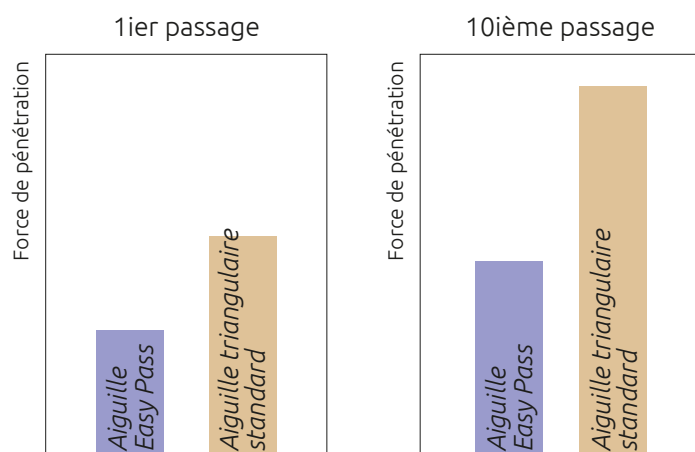
Excellente pénétration pour réduire le traumatisme du patient et préserver l'intégrité intime
Pénétration optimale et prévisible
Aiguille tranchante sur une multiplicité de passages

Significativement plus pénétrante passage après passage
Meilleure résistance à la flexion et la rupture
Combinaison optimale entre résistance et flexibilité


Surface extrêmement lisse
Meilleure pénétration, contrôle et passage des aiguilles
Maintien du caractère tranchant de l'aiguille du début à la fin sur une multitude de passages

INDICATIONS Chirurgie cosmétique et plastique


Meilleure performance de pénétration de 40% - 50% par rapport à l'aiguille triangulaire standard



FILS RÉSORBABLES

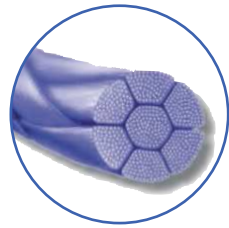


SURGICRYL®
910
POLYGLACTINE

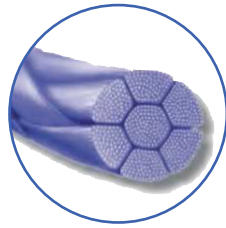


SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



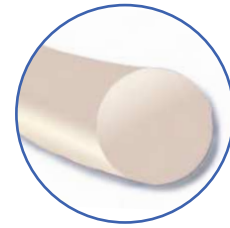SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
MONOFAST
POLYGLICAPRONE 25

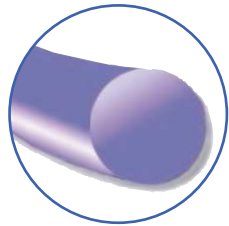

SURGICRYL®
MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE




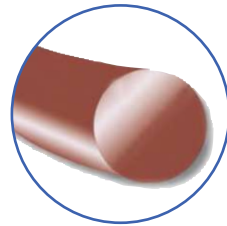CATGUT
PLAIN



CATGUT
CHROM

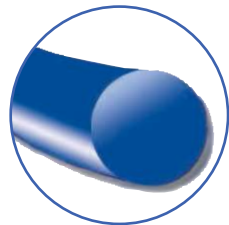
FILS NON RÉSORBABLES




POLYPROPYLENE
BLUE



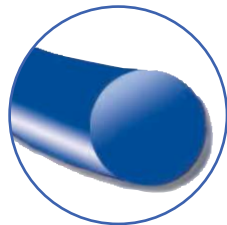
POLYESTER




DACLON
NYLON
BLUE

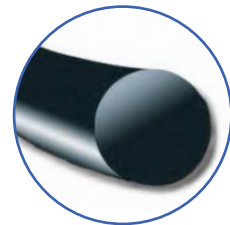


DACLON
NYLON
BLACK

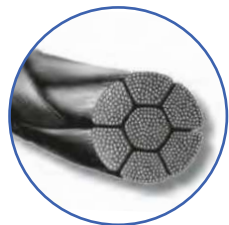


SILK
BRAIDED
BLACK

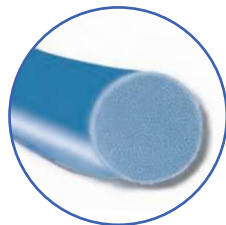

SILK
VIRGIN
BLUE

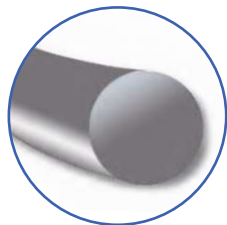



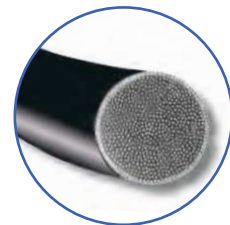




STEEL
MONOFILAMENT



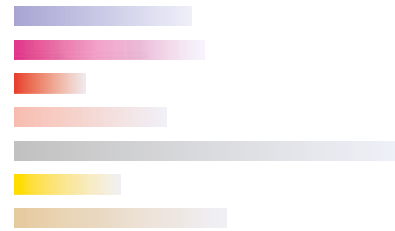
SUPRAMID
BLACK

Matériel de suture en pochettes

résorbable

-  SURGICRYL® 910 Polyglactine
-  SURGICRYL® PGA Acide polyglycolique
-  SURGICRYL® Rapid Acide polyglycolique
-  SURGICRYL® Monofast Polyglécaprone
-  SURGICRYL® Monofilament Polydioxanone
-  CATGUT Plain
-  CATGUT Chromé

Diminution de la résistance à la traction avec le temps:



non résorbable





-  POLYPROPYLENE
-  DACLON Nylon
-  SUPRAMID Polyamide noir
-  SOIE Tressée
-  POLYESTER
-  ACIER Monofilament

Ophthalmologie

résorbable

-  SURGICRYL® PGA Acide polyglycolique
-  SURGICRYL® 910 Polyglactine

non résorbable

-  SOIE Tressée
-  DACLON Nylon
-  POLYESTER
-  POLYPROPYLENE







Autres articles

Agrafeuse chirurgicale cutanée & ôte-agraves
Biopsy punch
Support pour matériel de suture en pochettes
Treillis de polypropylène
Pilomat - écraseur et coupe-comprimés









Lames chirurgicales et bistouris
Marqueur pour la peau
Cire à os
SMI Spon - Éponge de gélatine résorbable
Aiguilles chirurgicales

Matériel de suture en cassettes

résorbable

-  SURGICRYL® PGA Acide polyglycolique
-  SURGICRYL® PGA Plus Acide polyglycolique
-  SURGICRYL® Monofilament Polydioxanone
-  SURGICRYL® Monofast Polyglécaprone
-  CATGUT Plain
-  CATGUT Chromé

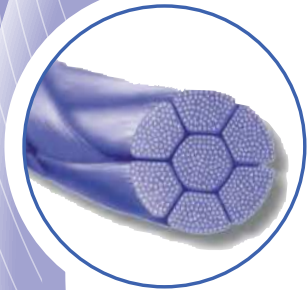
non résorbable

-  SOIE Tressée noire
-  SUPRAMID Polyamide blanc
-  SUPRAMID Polyamide noir
-  LINAFILE Natural
-  VITAFIL Polyester blanc
-  DERMAFIL Polyester vert
-  DACLON Nylon
-  Acier Monofilament


SURGICRYL[®]

910

POLYGLACTINE



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Polyglactine 910, un copolymère fait de 90% de glycolide et de 10% de L-lactide
Enduit	Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%)
Couleur	Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 56 à 70 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persiste après 21 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes

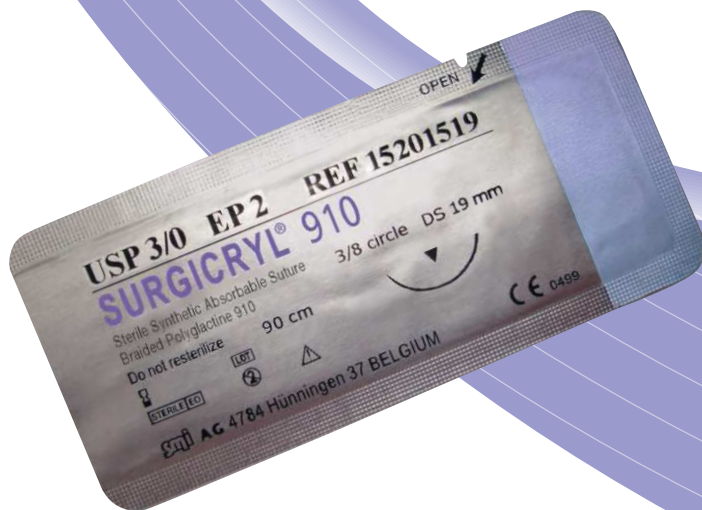

*Pour qualité
&
sécurité*

SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée

- Multifilament enduit

- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale
 Fermeture de peau
 Chirurgie gastro-intestinale
 Chirurgie plastique
 Chirurgie ophtalmologique
 Gynécologie
 Obstétrique
 Chirurgie orthopédique
 Urologie

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellente sécurité des noeuds

- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
- Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
- Action capillaire réduite

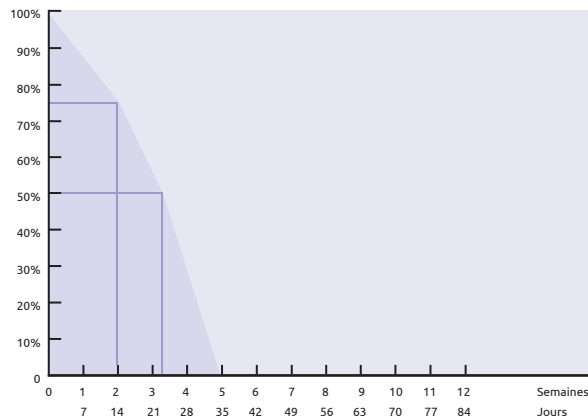
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
 Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION

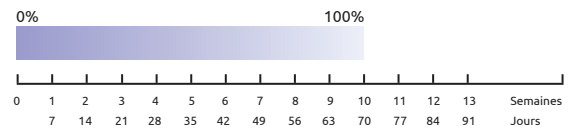

 Without needle

Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	150 cm	<i>violet</i>	15150015
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	15200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	15300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	15400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	15500015
3	2/0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-3
3.5	0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-3
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-6
1.5	4/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15500045
2	3/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15200070-2
3	2/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15300070-2
3.5	0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15350070-2
4	1	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15400070-2
5	2	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15500070-2
4	1	7 x 75 cm	<i>violet</i>	15400075

 Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	15200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	15300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	15350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	15400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	15500025



Round bodied taper point








1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150113
HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200117
HR 22 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200122
HR 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300122
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400122
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100126
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350126
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400126
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200130
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300130
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350130
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400130
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500130
HR 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300136
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	15300136U
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400136
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500136

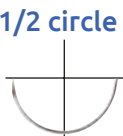



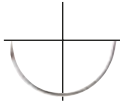

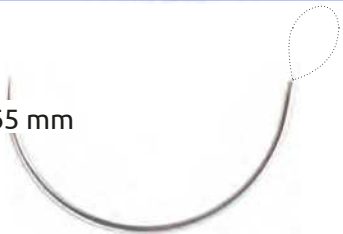
Round bodied taper point




		Metric	USP	Length	Color	Order number
	HR 40 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300140
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350140-75
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500140-75
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500140
	HR 45 mm 	4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400145
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500145
	HR 48 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400148
	HR 60 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500148
4		1	75 cm	<i>violet</i>	15400160	
5		2	90 cm	<i>violet</i>	15500160	
HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300165	
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350165	
HR 80 mm 	4	1	100 cm	<i>violet</i>	15400180	
	5	2	100 cm	<i>violet</i>	15500180	







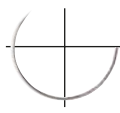













Round bodied taper point double armed






		Metric	USP	Length	Color	Order number
	2 x HR 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126-2
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126-2

	Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 45 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350945
	HR 65 mm 	5	2	240 cm	<i>violet</i>	15500965

	Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
5/8 circle 	FR 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200326
	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300327
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350327

	Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DR 17 mm 	1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15150217
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200217
	DR 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200222
	DR 30 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400230
	DR 32 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300232
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350232

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
	HS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071412	
	HS 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101417	
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151417	
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201422	
	HS 23 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501423	
	HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201426	
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301426	
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351426	
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401426	
	HS 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201430	
		HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301436
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351436
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401436
	HS 40 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501436	
		HS 40 mm 	2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	15201440
			3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301440
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351440
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401440
	HS 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501440	
		HS 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351448
4			1	90 cm	<i>violet</i>	15401448	
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501448	


 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	15101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15151512
	DS 16 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151516
		2	3/0	45 cm	<i>violet</i>	15201516-45
	DS 16 mm Easy Pass 	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201516UP



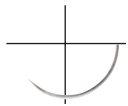Reverse cutting









		Metric	USP	Length		Order number
DS 16 mm black		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516VB
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	15151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201519UP
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301524
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351524
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201524UP
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301526
DS 26 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	15201526UP
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	15301526UP-75
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201530
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301530
		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301530-90
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351530
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351530-90
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401530-90
DS 30 mm Easy Pass		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	15301530UP-75
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301536
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351536
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401536
DS 36 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201536P
DS 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351540
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401540
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301545
DS 80 mm		7	5	150 cm	<i>violet</i>	15701580

3/8 circle







Round bodied taper cutting point

			Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 circle 	HRT 13 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150513
	HRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150517
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200517
	HRT 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150526
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200526
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300526
	HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350530
	HRT 36 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400530
			3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300536
HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350536	
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400536	
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15350540	
HRT 48 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15400540	
		8	6	150 cm	<i>violet</i>	15800548	








Round bodied taper cutting point





			Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 circle 	DRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150417
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200417







Round bodied taper cutting point

			Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 circle 	DRT 13 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100530-0413
	1/2 circle 	HRT 30 mm					

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number	
Straight		GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15202160
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15302160

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number	
		HRB 36 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351836
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401836
		HRB 40 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401840
		HRB 45 mm	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501845

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number	
		DRB 63 mm	4	1	100 cm	<i>violet</i>	15401963
			5	2	75 cm	<i>violet</i>	15501985
		DRB 85 mm	5	2	75 cm	<i>violet</i>	15501985

SURGICRYL®


PGA

POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Acide polyglycolique
Enduit	Polycaprolactone et calcium stéarate (1%)
Couleur	Violet / Beige - non coloré
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 60 à 90 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes

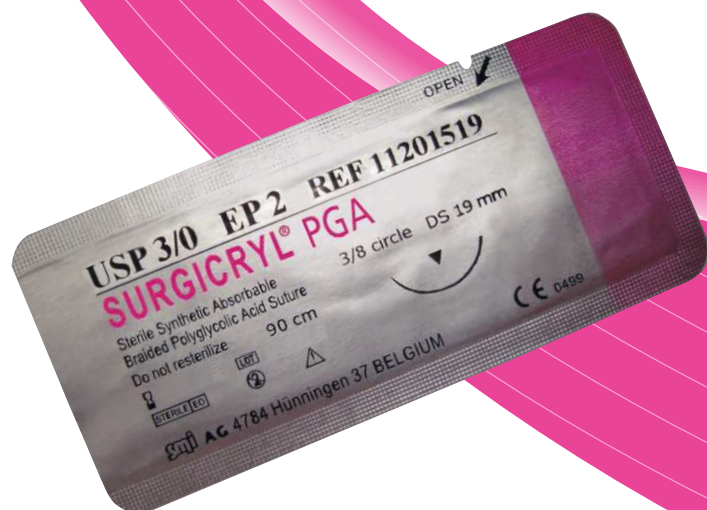

Pour qualité
&
sécurité

SURGICRYL®

PGA
POLYGLYCOLIC ACID

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée

- Multifilament enduit

- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Chirurgie plastique
Urologie
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie orthopédique

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite

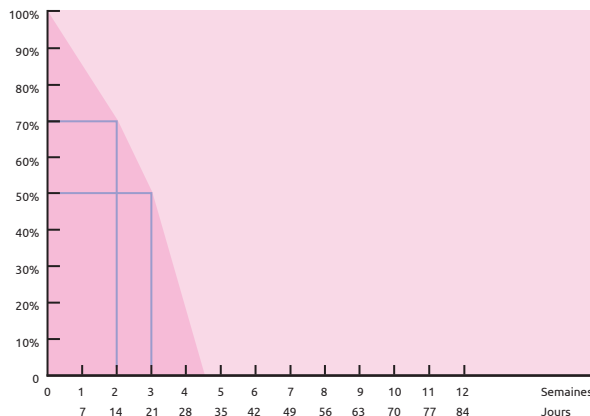
Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION

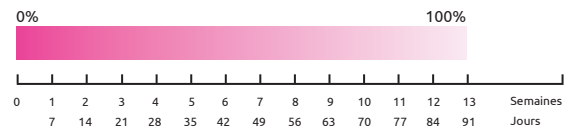

○ Without needle

Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	11200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	11300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	11400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	11500015
6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	11600015
7	5	150 cm	<i>violet</i>	11700015
8	6	150 cm	<i>violet</i>	11800015
1.5	4/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11150050
2	3/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11350050
4	1	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11400050
5	2	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11500050
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045-6
4	1	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045-6
5	2	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045-6
3	2/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11300060
2	3/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11200070
3	2/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11300070
3.5	0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11350070
4	1	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11400070
5	2	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11500070



Without needle

Ligapack










Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	250 cm	<i>violet</i>	11150025
2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	11200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	11300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	11350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	11400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	11500025
6	3&4	250 cm	<i>violet</i>	11600025











Round bodied taper point




1/2 circle








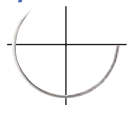

	Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070113
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100113
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150113
HR 17 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070117
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150117
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200117
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300117
HR 20 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300120
HR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150122
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200122
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300122
HR 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150126
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200126
	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11200126U
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300126
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300126U
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350126
	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400126
HR 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200130
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300130
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350130
	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400130
HR 36 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200136
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300136
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350136
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400136




 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
	HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11500140-75
	HR 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500148
6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11600148		






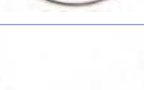


 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
	DR 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150217
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200217
	DR 25 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400225




 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300327

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
	JR 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11303036
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11353036
	JR 40 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11403040

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
5/8 circle  J-needle 	JR 36 mm FR 27 mm	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11353036-0327

 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle  	HR 50 mm	4	1	150 cm	<i>violet</i> 11400950

 Round bodied taper cutting point	Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle       	HRT 26 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300526
	HRT 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11350530
		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11400530
	HRT 36 mm	3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 11300536
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11350536
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 11400536
	HRT 40 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11350540
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 11400540
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 11500540
	HRT 43 mm	3.5	0	150 cm	<i>violet</i> 11350543-150
	HRT 48 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i> 11400548


 Round bodied taper cutting point	Metric	USP	Length	Order number	
J-needle  	JRT 31 mm	4	1	75 cm	<i>violet</i> 11403131






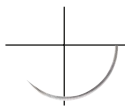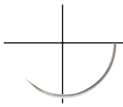
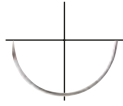





Reverse cutting



		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	11071512U
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151512UP
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101516
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	11101516U
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151516U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201516
DS 16 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151516UP
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i>	11151519-90
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151519U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201519
		2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	11201519-90
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201519U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301519
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201519UP
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201524
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201524U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301524U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201524UP
		3	2/0	50 cm	<i>undyed</i>	11301524UP



3/8 circle





Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
3/8 circle 	DS 30 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151530
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201530
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301530
			3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301530U
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351530
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401530
			5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501530
	DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301536
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351536
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401536
	DS 40 mm		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501536
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301540
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351540
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401540
			5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501540

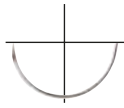Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
1/2 circle 	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201422
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201422U
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301422
			3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301422U
	HS 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151426
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201426
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301426
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351426
	HS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201430
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301430
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501430
	HS 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11301436
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351436
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401436
	HS 40 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501436
			3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11301440
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351440
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401440
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501440	

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number		
 1/2 circle	HS 48 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351448
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401448
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501448
			6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11601448

Cutting		Metric	USP	Length	Order number		
 Straight	GS 60 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11202160
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11202160U
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11302160
			3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11302160U

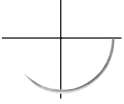Cutting		Metric	USP	Length	Order number		
 3/8 circle	NS 16 mm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101716

SURGICRYL®

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Acide polyglycolique
Enduit	Polycaprolactone et calcium stéarate (1%)
Couleur	Beige - non coloré / Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 42 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 7 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



*Pour qualité
&
sécurité*

SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL®

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction initiale élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée

- Multifilament enduit

- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible, quick mass absorption
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellente sécurité des noeuds

- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
- Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
- Action capillaire réduite

- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous superficiels seuls

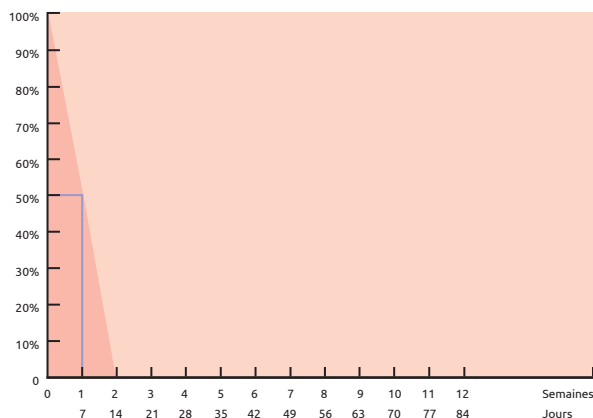
spécialement Chirurgie plastique
Obstétrique (épisiotomie)
Gynécologie
Urologie (circoncision)
Chirurgie ophtalmologique (conjonctives)
Chirurgie pédiatrique

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Ligature

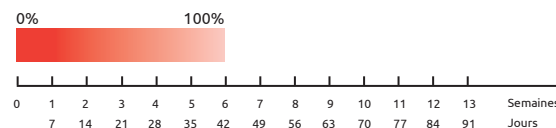
Suture résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 7 jours est requis


À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)












RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION


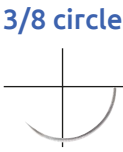



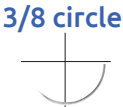
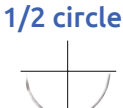

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	2	3/0	150 cm	<i>undyed</i>	14200015
	3	2/0	150 cm	<i>undyed</i>	14300015
	3.5	0	150 cm	<i>undyed</i>	14350015
	4	1	150 cm	<i>undyed</i>	14400015
	5	2	150 cm	<i>undyed</i>	14500015


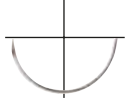
 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100113
HR 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150117
HR 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200117
	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150122
HR 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200122
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300122
HR 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200126
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300126
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350126
HR 36 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200130
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300130
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350130
HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300136
	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350136
	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400136
HR 48 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300140
	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350140
	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400140
HR 48 mm 	5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500140
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300148
	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350148
HR 48 mm 	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400148
	5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500148


1/2 circle


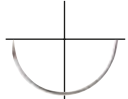




 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
 <p>3/8 circle</p>	DS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i> 14071512
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i> 14071512P
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i> 14101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 14151512P
	DS 16 mm	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14151516
		2	3/0	45 cm	<i>undyed</i> 14201516
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14101516VB
	DS 19 mm	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14151519
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14201519
	DS 19 mm Easy Pass	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301519
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 14151519P
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i> 14201519P
	DS 19 mm black	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14201519VB
DS 24 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14201524	
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301524	
DS 24 mm Easy Pass	3	2/0	50 cm	<i>undyed</i> 14301524P	
DS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14201526	
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301526	
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14351526	
DS 30 mm	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14351530	
DS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301536	
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14351536	

  Reverse cutting Round bodied taper cutting point		Episio Set	Order number			
 <p>3/8 circle</p>	 <p>1/2 circle</p>	DS 26 mm		1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm 2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm	<i>undyed</i>	S-1430-1435
		DS 26 mm HRT 40 mm				

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HS 17 mm	1.5	4/0	45 cm	<i>undyed</i> 14151417
		2	3/0	45 cm	<i>undyed</i> 14201417
	HS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301436
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14351436
	HS 40 mm	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14351440
		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14401440
		5	2	90 cm	<i>undyed</i> 14501440

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14202160


 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HRT 17 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200517
	HRT 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200526
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300526
	HRT 36 mm	3	2/0	90 cm	<i>undyed</i> 14300536
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350536
	HRT 40 mm	4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400536
		3	2/0	90 cm	<i>undyed</i> 14300540
	HRT 40 mm	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350540
		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400540
	HRT 48 mm	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350548
4		1	90 cm	<i>undyed</i> 14400548	

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DRT 16 mm	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14100416
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14150416
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200416
	DRT 19 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14150419
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200419

SURGICRYL®

MONOFAST

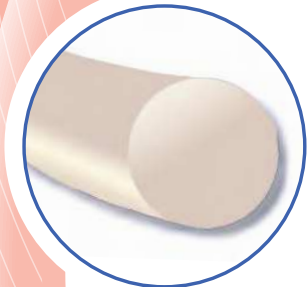POLYGLÉCAPRONE 25



Type	Monofilament
Composition	Polyglécaprone 25, un copolymère fait de 75% glycolide et de 25% d'ε-caprolactone
Enduit	Aucun
Couleur	Violet / Beige - non coloré
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 90 à 110 jours. Environ 75% de la résistance à la traction persistent après 7 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



*Pour qualité
&
sécurité*

SURGICRYL®

MONOFAST

POLYGLÉCAPRONE 25

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Pliabilité et souplesse
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

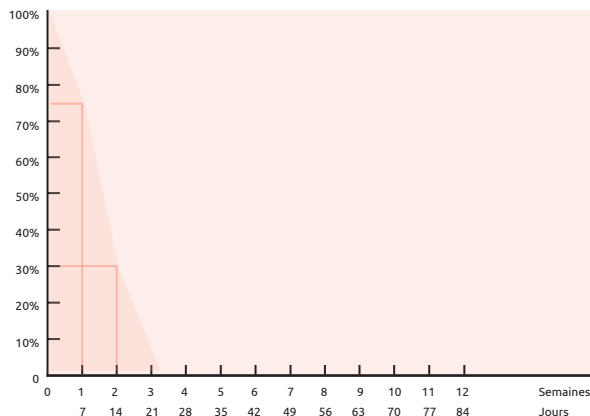
spécialement Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie plastique
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Urologie

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Chirurgie ophtalmologique


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire


À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION

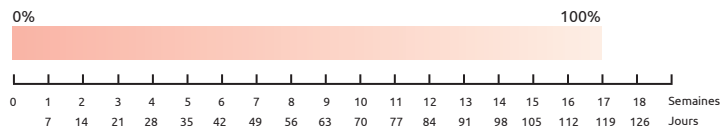

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	16300015
	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	16350015
	4	1	150 cm	<i>violet</i>	16400015
	5	2	120 cm	<i>violet</i>	16500012
	5	2	150 cm	<i>violet</i>	16500015

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
--	--------	-----	--------	--	--------------

Ligapack














5	2	250 cm	<i>violet</i>	16500025
---	---	--------	---------------	----------


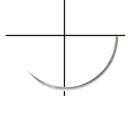







 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
--	--------	-----	--------	--	--------------


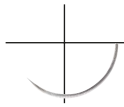






1/2 circle


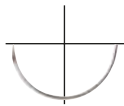








HR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	16070113
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150113
HR 17 mm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200117
HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300122
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300126
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350126
HR 30 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	16400126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300130
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350130
HR 36 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	16400130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350136
HR 40 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350140
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400140	




 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	HR 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 16350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 16400148
	HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 16300165





 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i> 16071512
		0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i> 16071512-75
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 16071512V
		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i> 16101512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 16101512V
		DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i> 16101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 16151512P
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 16101516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 16101516V
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 16151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 16151516V
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 16201516
		DS 16 mm Easy Pass 	1	5/0	50 cm
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 16151516P
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 16101516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	45 cm	<i>undyed</i> 16101519
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 16101519V
1.5		4/0	75 cm	<i>undyed</i> 16151519	
1.5		4/0	75 cm	<i>violet</i> 16151519V	
2		3/0	75 cm	<i>undyed</i> 16201519	
2		3/0	75 cm	<i>violet</i> 16201519V	
3		2/0	75 cm	<i>undyed</i> 16301519	
DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 16151519P	
	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i> 16201519P	

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 19 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151519VB
	DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524
	DS 24 mm Easy Pass 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524P-75
	DS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151526
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201526V
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526
	DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16351530V
	DS 40 mm 	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351540
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401540


 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	HS 30 mm 	4	1	240 cm	<i>violet</i>	16401430V-240
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436V
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351436
	HS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401440

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16202160
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16302160

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
	DRT 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16100416

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 16351840
	HRB 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i> 16401848

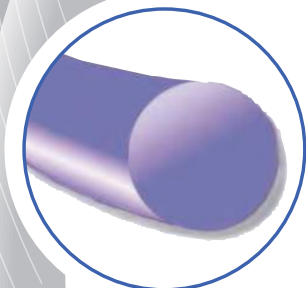SURGICRYL® MONOFILAMENT POLYDIOXANONE



Type	Monofilament
Composition	Polydioxanone, un polymère fait de polyester poly (p-dioxanone)
Enduit	Aucun
Couleur	Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 180 à 210 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 42 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

SURGICRYL®
MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée et durable
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Pliabilité et souplesse
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Persistance exceptionnelle de la résistance à la traction pour un soutien prolongé de la plaie
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

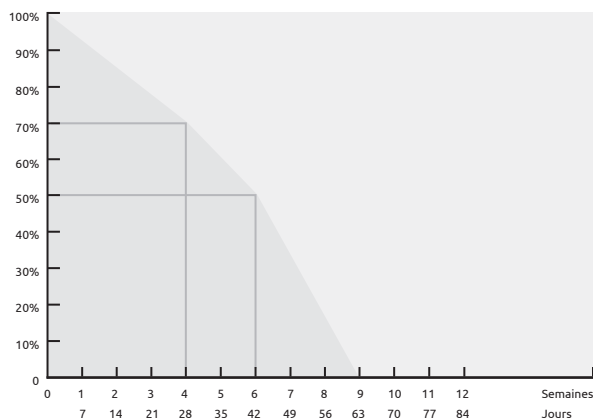
INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général
 spécialement Chirurgie générale
 Chirurgie gastro-intestinale
 Chirurgie ophtalmologique
 Chirurgie orthopédique
 Fermeture de la paroi abdominale
 Gynécologie
 Chirurgie plastique
 Urologie

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
 Neurochirurgie
 Prosthetic devices


Suture résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 6 semaines est requis

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION

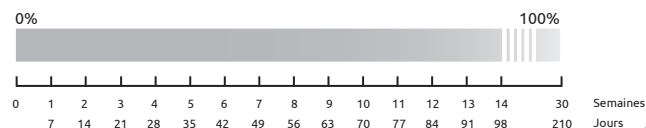

 Without needle	Metric	USP	Length	Order number
	5	2	150 cm	<i>violet</i> 13500015

 Without needle	Metric	USP	Length	Order number
--	--------	-----	--------	--------------

Ligapack

















2	3/0	250 cm	<i>violet</i> 13200025
---	-----	--------	------------------------


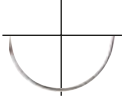



 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
--	--------	-----	--------	--------------




1/2 circle





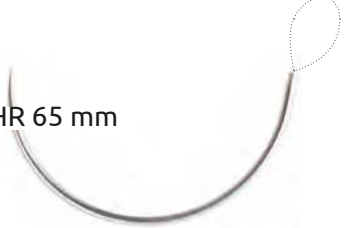



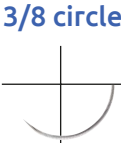










HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 13070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13100113
HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 13070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200117
HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200122
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13300126
HR 30 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 13350126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200130
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13300130
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 13350130
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 13350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 13400136
HR 48 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 13350140
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 13400140
HR 48 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i> 13500140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 13350148
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i> 13400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 13500148


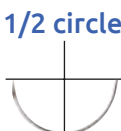

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
	DR 13 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100213
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150213
	DR 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100217


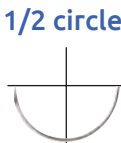

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
	2 x HR 13 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113-2
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117-2
	2 x HR 17 mm 	1	5/0	90 cm	<i>violet</i>	13100117-2
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117-2
2 x HR 26 mm 	2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	13200126-2	

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
	2 x DR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070213-2

 Round bodied taper point loop		Metric	USP	Length		Order number
	HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350940
		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400940
	HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350950
		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400950
		5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500950
	HR 65 mm 	4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400965

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	13071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151512
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151516
	DS 16 mm Easy Pass 	1	5/0	50 cm	<i>violet</i>	13101516P
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101519
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101519-75
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i>	13151519-90
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201519
	DS 19 mm black 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519VB
	DS 24 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201524
		2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	13201524-90
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301524-90
DS 26 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351524	
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201526	
DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301526	
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351530	
DS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401530	
	5	2	90 cm	<i>violet</i>	13501540	

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301436
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351436
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	13401436

 Blunt loop		Metric	USP	Length		Order number
	HRB 50 mm 	4	1	150 cm	<i>violet</i>	13401850

CATGUT

PLAIN



Type	Multifilament torsadé avec un aspect de monofilament
Composition	Tissu conjonctif purifié provenant de la membrane séreuse intestinale de bovins sélectionnés (originaire de pays réputés exempts d'ESB)
Enduit	Aucun
Couleur	Ivoire
Réaction tissulaire	Modérée
Résorption	Par phagocytose. Résorption totale du fil endéans les 63 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 7 jours. La résorption est plus rapide au niveau des tissus infectés et au niveau des sites présentant des taux d'enzymes protéolytiques élevés (vagin, col de l'utérus, estomac).
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

CATGUT
PLAIN

CATGUT

PLAIN

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Résorption by phagocytosis
- Structure tordue

- Diamètre uniforme par polissage
"centerless" (apparence de monofilament)
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Résorption uniforme
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellente sécurité des noeuds

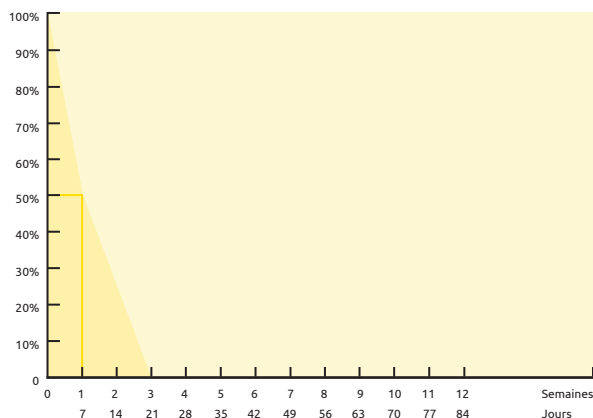
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Nouage excellent

- Étanchéité et stérilité des produits garanties


INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature
spécialement Chirurgie générale
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Urologie
Chirurgie ophtalmologique

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire
À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)
Plaies infectées
Sensibilisation ou allergie connue au collagène

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION

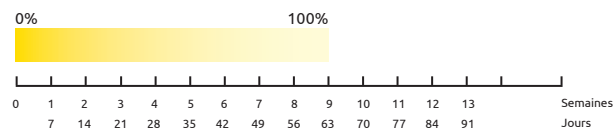

CATGUT

PLAIN



Without needle

Metric USP Length Order number

2	4/0	150 cm	<i>ivory</i>	1200015
3	3/0	150 cm	<i>ivory</i>	1300015
3.5	2/0	150 cm	<i>ivory</i>	1350015
4	0	150 cm	<i>ivory</i>	1400015
5	1	150 cm	<i>ivory</i>	1500015
6	2	150 cm	<i>ivory</i>	1600015
7	3	150 cm	<i>ivory</i>	1700015



Round bodied taper point

Metric USP Length Order number













1/2 circle



HR 16 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>ivory</i>	1150116
		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200116
HR 20 mm		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200120
		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300120
HR 26 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350120
		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200126
HR 30 mm		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300126
		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350126
		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400126
HR 37 mm		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300137
		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350137
		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400137
		5	1	75 cm	<i>ivory</i>	1500137
HR 40 mm		5	1	90 cm	<i>ivory</i>	1500140-90
HR 45 mm		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400145
		5	1	75 cm	<i>ivory</i>	1500145
		6	2	75 cm	<i>ivory</i>	1600145
HR 50 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350150


CATGUT

PLAIN

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
3/8 circle 	DS 12 mm		1.5	5/0	45 cm	<i>ivory</i>	1151512
			1	6/0	45 cm	<i>ivory</i>	1101516
	DS 16 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>ivory</i>	1151516
			2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201516
			3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301516
	DS 19 mm		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201519
			3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301519
	DS 24 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351519
			2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201524
	DS 24 mm		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301524
			3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351524
			4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1401524
	DS 37 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351537

CATGUT

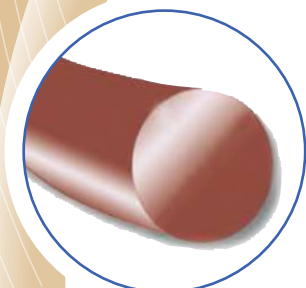CHROM



Type	Multifilament torsadé avec un aspect de monofilament
Composition	Tissu conjonctif purifié provenant de la membrane séreuse intestinale de bovins sélectionnés tanné avec des sels de chrome (originaire de pays réputés exempts d'ESB)
Enduit	Aucun
Couleur	Brun foncé
Réaction tissulaire	Modérée
Résorption	Par phagocytose. La résorption est ralentie par le chrome. Résorption totale du fil endéans les 90 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persiste après 14 jours. La résorption est plus rapide au niveau des tissus infectés et au niveau des sites présentant des taux d'enzymes protéolytiques élevés (vagin, col de l'utérus, estomac).
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

CATGUT
CHROM

CATGUT

CHROM

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Résorption by phagocytosis
- Structure tordue

- Diamètre uniforme par polissage
"centerless" (apparence de monofilament)
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Résorption uniforme
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellente sécurité des noeuds

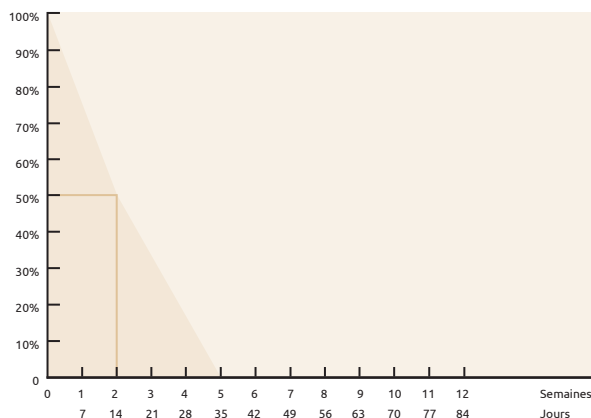
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Nouage excellent

- Étanchéité et stérilité des produits garanties


INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature
spécialement Chirurgie générale
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Urologie
Chirurgie ophtalmologique

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire
À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)
Plaies infectées
Sensibilisation ou allergie connue au collagène ou au chrome

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION

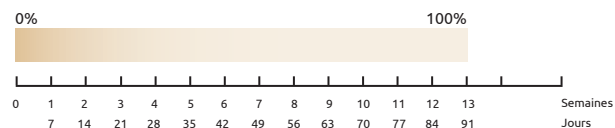

CATGUT

CHROM



Without needle

Metric USP Length Order number

2	4/0	150 cm	<i>brown</i>	2200015
3	3/0	150 cm	<i>brown</i>	2300015
3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i>	2350015
4	0	150 cm	<i>brown</i>	2400015
5	1	150 cm	<i>brown</i>	2500015
6	2	150 cm	<i>brown</i>	2600015
7	3	150 cm	<i>brown</i>	2700015
8	4	150 cm	<i>brown</i>	2800015
10	6	150 cm	<i>brown</i>	21000015



Round bodied taper point

Metric USP Length Order number


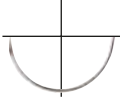




HR 15 mm		1	6/0	75 cm	<i>brown</i>	2100115
		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150115
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200115
HR 20 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150120
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200120
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300120
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350120
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400120
HR 26 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150126
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200126
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300126
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350126
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400126
HR 30 mm		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500126
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200130
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300130
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350130
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400130
HR 37 mm		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500130
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200137
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300137
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350137
		3.5	2/0	90 cm	<i>brown</i>	2350137-90
4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400137		
5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500137		




1/2 circle







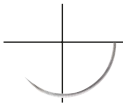








CATGUT




CHROM

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
 1/2 circle	 HR 40 mm	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2350140
		3.5	2/0	90 cm	<i>brown</i> 2350140-90
		4	0	75 cm	<i>brown</i> 2400140
		5	1	75 cm	<i>brown</i> 2500140
		5	1	90 cm	<i>brown</i> 2500140-90
		6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600140
	 HR 45 mm	4	0	75 cm	<i>brown</i> 2400145
		6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600145
	 HR 48 mm	5	1	75 cm	<i>brown</i> 2500148
	 HR 50 mm	6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600150
6		2	90 cm	<i>brown</i> 2600150-90	

 Round bodied taper point reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number	
 1/2 circle	 HR 37 mm HS 37 mm	3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i> 2350137-1437


 Blunt	Metric	USP	Length	Order number	
 3/8 circle	 DRB 63 mm	5	1	75 cm	<i>brown</i> 2501963

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm 	1	6/0	45 cm	<i>brown</i>	2101512
		1.5	5/0	45 cm	<i>brown</i>	2151512
	DS 16 mm 	1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2151516
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201516
	DS 19 mm 	1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2151519
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201519
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301519
	DS 24 mm 	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351519
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201524
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301524
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351524
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401524
DS 30 mm 	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501524	
	3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301530	
	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351530	
DS 37 mm 	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401530	
	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501530	
	3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301537	
DS 40 mm 	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351537	
	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401537	
	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501537	
	DS 40 mm 	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351540
		6	2	75 cm	<i>brown</i>	2601540
		7	3	75 cm	<i>brown</i>	2701540

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	HS 37 mm 	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401437
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501437

POLYPROPYLENE

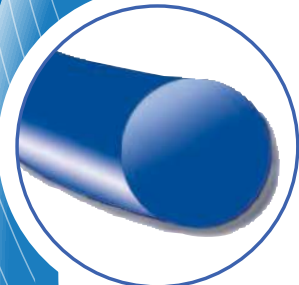BLUE



Type	Monofilament
Composition	Polypropylène, un polymère de propylène
Enduit	Aucun
Couleur	Bleu
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

POLYPROPYLENE

BLUE

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☑ Pliabilité et souplesse
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent et prolongé
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent
- Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie plastique
Fermeture de peau
Chirurgie orthopédique
Cure de hernie (aussi en tant que treillis)
Chirurgie gastro-intestinale
Chirurgie générale
Gynécologie
Obstétrique

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie




Round bodied taper point

			Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 circle 	HR 10 mm		0.5	7/0	45 cm	blue	5050110
			0.7	6/0	75 cm	blue	5070110
	HR 15 mm		0.7	6/0	75 cm	blue	5070115
			1	5/0	75 cm	blue	5100115
	HR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	5150115
			1	5/0	75 cm	blue	5100117
	HR 20 mm		2	3/0	75 cm	blue	5200117
			1	5/0	75 cm	blue	5100120
	HR 25 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	5150120
			2	3/0	75 cm	blue	5200120
			3	2/0	75 cm	blue	5300120
	HR 30 mm		1	5/0	75 cm	blue	5100125
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150125
			2	3/0	75 cm	blue	5200125
			3	2/0	75 cm	blue	5300125
	HR 35 mm		3.5	0	75 cm	blue	5350125
			4	1	75 cm	blue	5400125
			2	3/0	75 cm	blue	5200130
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	5300130	
		3.5	0	75 cm	blue	5350130	
		4	1	75 cm	blue	5400130	
HR 35 mm		4	1	75 cm	blue	5400135	
		3	2/0	75 cm	blue	5300135	
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	blue	5350140	
		4	1	90 cm	blue	5400140	
			5	2	75 cm	blue	5500140




Round bodied taper point



			Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 circle 	DR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	5150216

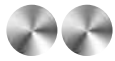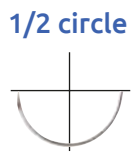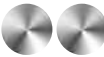
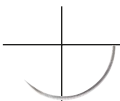


**Round bodied taper point
double armed**



		Metric	USP	Length		Order number
2 x HR 8 mm		0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5040108-2
		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5050108-2
		0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i>	5070108-2
2 x HR 9.3 mm		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5050193-2
		0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i>	5070193-2
2 x HR 10 mm		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5050110-2
		0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i>	5070110-2
		1	5/0	60 cm	<i>blue</i>	5100110-2
2 x HR 13 mm		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5050113-2
		0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i>	5070113-2
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100113-2
2 x HR 16 mm		0.7	6/0	90 cm	<i>blue</i>	5070116-2
		1	5/0	90 cm	<i>blue</i>	5100116-2
		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150116-2
		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200116-2
2 x HR 20 mm		1	5/0	90 cm	<i>blue</i>	5100120-2
		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150120-2
		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200120-2
2 x HR 25 mm		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150125-2
		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200125-2
		3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300125-2
2 x HR 30 mm		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200130-2
		3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300130-2
2 x HR 35 mm		3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300135-2
2 x HR 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>blue</i>	5350140-2
		4	1	90 cm	<i>blue</i>	5400140-2

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HR 15 mm	2	90 cm	<i>blue</i> 5200115-30
	HR 30 mm			

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	2 x DR 6.5 mm	0.4	60 cm	<i>blue</i> 50402065-2-60
	2 x DR 8 mm	0.4	45 cm	<i>blue</i> 5040208-2
		0.5	60 cm	<i>blue</i> 5050208-2
	2 x DR 9.3 mm	0.5	60 cm	<i>blue</i> 5050293-2
		0.7	60 cm	<i>blue</i> 5070293-2
	2 x DR 10 mm	0.7	60 cm	<i>blue</i> 5070210-2
		1	75 cm	<i>blue</i> 5100210-2
	2 x DR 13 mm	0.5	60 cm	<i>blue</i> 5050213-2
		1	60 cm	<i>blue</i> 5100213-2
		0.7	60 cm	<i>blue</i> 5070213-2
	2 x DR 18 mm	1	90 cm	<i>blue</i> 5100218-2
		1.5	90 cm	<i>blue</i> 5150218-2
	2 x DR 22 mm	1.5	90 cm	<i>blue</i> 5150222-2
	2 x DR 26 mm	1.5	90 cm	<i>blue</i> 5150226-2
	2 x DR 30 mm	3	90 cm	<i>blue</i> 5300230-2



Reverse cutting

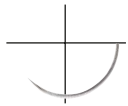
Metric

USP


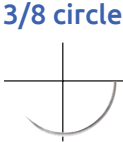
Length



Order number



3/8 circle



DS 10 mm		0.7	6/0	45 cm	blue	5071510
DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	blue	5051512
		0.7	6/0	45 cm	blue	5071512
		1	5/0	45 cm	blue	5101512
		1.5	4/0	75 cm	blue	5151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	blue	5071512P
		1	5/0	50 cm	blue	5101512P
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	blue	5071516
		1	5/0	45 cm	blue	5101516
		1.5	4/0	45 cm	blue	5151516-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	5151516
DS 16 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	blue	5201516
		0.7	6/0	50 cm	blue	5071516P
		1	5/0	50 cm	blue	5101516P
DS 16 mm black		1.5	4/0	50 cm	blue	5151516P
		1	5/0	45 cm	blue	5101516VB
		0.7	6/0	75 cm	blue	5071519
DS 19 mm		1	5/0	45 cm	blue	5101519-45
		1	5/0	75 cm	blue	5101519
		1.5	4/0	45 cm	blue	5151519-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	5151519
		2	3/0	45 cm	blue	5201519-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201519
		3	2/0	75 cm	blue	5301519
		3.5	0	75 cm	blue	5351519
DS 19 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	blue	5101519P
		1.5	4/0	50 cm	blue	5151519P
		2	3/0	50 cm	blue	5201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	blue	5101519VB
		1.5	4/0	75 cm	blue	5151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	5151524
		2	3/0	45 cm	blue	5201524-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201524
		3	2/0	45 cm	blue	5301524-45
		3	2/0	75 cm	blue	5301524
		3.5	0	75 cm	blue	5351524
		4	1	75 cm	blue	5401524

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	DS 24 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i> 5151524P
		2	3/0	50 cm	<i>blue</i> 5201524P
		3	2/0	50 cm	<i>blue</i> 5301524P
	DS 26 mm	2	3/0	45 cm	<i>blue</i> 5201526-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5201526
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i> 5301526-45
	DS 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301526
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5201530
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301530
	DS 36 mm	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5351530
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5201536
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301536
DS 40 mm	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5351536	
	4	1	75 cm	<i>blue</i> 5401536	
	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301540	
DS 45 mm	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5351540	
	4	1	90 cm	<i>blue</i> 5401540	
DS 90 mm	5	2	90 cm	<i>blue</i> 5501540	
	4	1	90 cm	<i>blue</i> 5401545	
		4	1	90 cm	<i>blue</i> 5401590

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	HS 22 mm	2	3/0	45 cm	<i>blue</i> 5201422
	HS 24 mm	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301424

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5202160
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5302160
	GS 75 mm	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5302175



Round bodied taper cutting point double armed

			Metric	USP	Length		Order number	
1/2 circle 	2 x HRT 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100516-2	
				1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150516-2
	2 x HRT 22 mm		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150522-2	
				1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150522-2
	2 x HRT 25 mm		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150525-2	
				2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200525-2
				3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300525-2
	2 x HRT 30 mm		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200530-2	
				3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300530-2



Round bodied taper cutting point

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 10 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5070510
	HRT 25 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5300525



Soft cutting point coronary double armed

			Metric	USP	Length		Order number	
3/8 circle 	2 x CC 6.4 mm		0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5042606-2	
				0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5042608-2
	2 x CC 8 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i>	5052608-2	
				0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072608-2
	2 x CC 9.3 mm		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5052693-2	
				0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i>	5072693-2
	2 x CC 10 m		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i>	5052610-2	
				0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072610-2
	2 x CC 13 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i>	5052613-2	
				0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072613-2
				1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5102613-2



Soft cutting point coronary
black double armed


3/8 circle



			Metric	USP	Length		Order number
2 x CC 8 mm black			0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5042608-2VB
			0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i>	5052608-2VB
			0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072608-2VB
			0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5042609-2VB
			0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5052609-2VB
			0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072613-2VB
2 x CC 13 mm black			1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5102613-2VB

DACLON

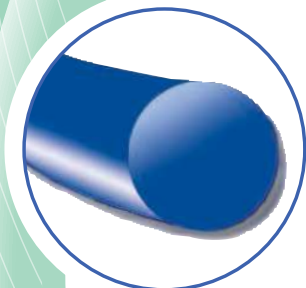NYLON



Type	Monofilament
Composition	Extrusion de polyamide 6.0 ou 6.6
Enduit	Aucun
Couleur	Bleu Noir
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif. La masse du fil diminue d'environ 10% par année par la rupture de liens chimiques (hydrolyse).
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☑ Pliabilité et souplesse
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent et prolongé
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent
- Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

Daclon Bleu

spécialement Fermeture de peau
Chirurgie générale
Chirurgie plastique
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Chirurgie orthopédique

Daclon Noir

spécialement Chirurgie plastique
Chirurgie ophtalmologique

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie


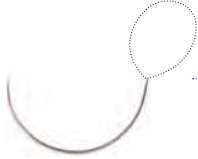






Round bodied taper point


		Metric	USP	Length		Order number
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9100116
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9150116
HR 20 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9070120
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9100120
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9150120
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9200120
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300120
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9150126
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9200126
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300126
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9350126
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9400126
HR 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300130
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9350130
HR 37 mm		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9400130
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300137
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9350137
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9400137
HR 50 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300140
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9350140
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9400140
		5	2	75 cm	<i>blue</i>	9500140
HR 50 mm		4	1	100 cm	<i>blue</i>	9400150



1/2 circle






 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number
HR 30 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350930
	4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400930
HR 35 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350935
	4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400935
1/2 circle  HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350940
	4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400940
HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350950
	4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400950

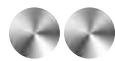Round bodied taper point double armed

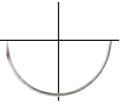









	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle  2 x HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 9300165-2

 Blunt	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  DRB 40 mm 	4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401840



Reverse cutting











		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071512P
		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151512P
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	9071516-45
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071516
		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101516-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151516-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151516
DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071516P
		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516VB
DS 19 mm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101519-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151519-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	9151519-90
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201519
		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	9201519-90
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151519P
		2	3/0	50 cm	<i>blue</i>	9201519P
		3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519VB

3/8 circle

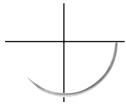



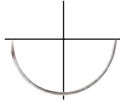












Reverse cutting






		Metric	USP	Length		Order number
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101524
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151524
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201524-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201524
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301524-45
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301524
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351524
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401524
		5	2	90 cm	<i>blue</i>	9501524
DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201526-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201526
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301526-45
DS 30 mm		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301526
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201530
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301530
DS 36 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351530
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401530
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201536
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301536
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351536
		4	1	90 cm	<i>blue</i>	9401536-90
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401540
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301540
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351540
		4	1	90 cm	<i>blue</i>	9501540
DS 55 mm		3	2/0	100 cm	<i>blue</i>	9301545
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401545
DS 60 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301560
		3	2/0	100 cm	<i>blue</i>	9301560-100
DS 90 mm		3	2/0	100 cm	<i>blue</i>	9301590
		3.5	0	100 cm	<i>blue</i>	9351590
		4	1	100 cm	<i>blue</i>	9401590

3/8 circle




 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	HS 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 9151417
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201417
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201422
	HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201426
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301426
	HS 30 mm 	2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 9201430
		3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 9301430
	HS 36 mm 	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351430
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351436
		4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401436
	HS 40 mm 	5	2	75 cm	<i>blue</i> 9501436
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351440
4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401440		
HS 48 mm 	4	1	100 cm	<i>blue</i> 9401448	

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9202160
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9302160
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9302175

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number	
	NS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201726	
		NS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301730
		NS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301740

SUPRAMID

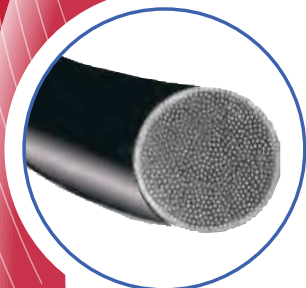BLACK



Type	Multifilament torsadé et gainé Épaisseur du fil 5/0 et 6/0 monofilament
Composition	Fil de polyamide 6.6 enrobé d'une couche de polyamide 6
Couleur	Noir
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

SUPRAMID
BLACK

SUPRAMID

BLACK

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Structure tordue

- ☑ Multifilament avec un manchon

- ☑ Pliabilité et souplesse

- ☑ Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature
spécialement Fermeture de peau

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent et prolongé

Réaction tissulaire minimale



Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds



Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite



Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds



Étanchéité et stérilité des produits garanties


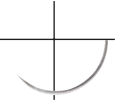
CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie


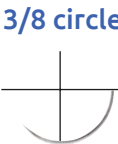







 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HR 16 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150116
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200116
	HR 20 mm	2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4200120
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4300126
	HR 26 mm	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4300126
		4	1/0	75 cm	<i>black</i> 4400126


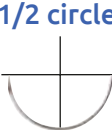

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GR 22 mm	1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152022


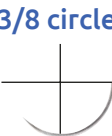

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HS 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151417
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201417
	HS 20 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101420
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151420
	HS 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201420
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151422
	HS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201426
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301426

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GS 20 mm	1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152120
	GS 25 mm	1.5	4/0	60 cm	<i>black</i> 4152125


 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071512
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101512-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151512

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	DS 16 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071516
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101516-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151516-75
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4201516
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201516-75
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101516VB
	DS 19 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071519
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519-75
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201519
DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519P-75	
DS 19 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519VB	
	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519VB	
DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201524	
	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301524	
	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 4351524	
DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301536	
	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 4351536	
		4	1	75 cm	<i>black</i> 4401536

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
	HRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200518

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200418

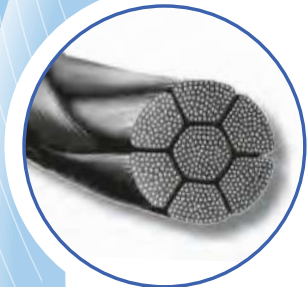SILK



Type	Multifilament tressé
Composition	Fibres tressées du cocon du ver à soie
Enduit	Silicone
Couleur	Noir
Réaction tissulaire	Modérée
Résorption	La suture de soie provoque une réaction inflammatoire initiale, qui est suivie par une encapsulation progressive du fil par le tissu conjonctif fibreux
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

SILK

SILK

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Structure tressée ou tordue
- ☑ Multifilament enduit
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

Soutien tissulaire bon et prolongé jusqu'à 3 mois

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite

Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature
spécialement Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie buccale
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie
Sensibilisation ou allergie connue à la soie



Without needle

Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>black</i>	8200015
3	2/0	150 cm	<i>black</i>	8300015
3.5	0	150 cm	<i>black</i>	8350015
4	1	150 cm	<i>black</i>	8400015
5	2	150 cm	<i>black</i>	8500015
6	3&4	150 cm	<i>black</i>	8600015
8	6	150 cm	<i>black</i>	8800015
2	3/0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8200044
3	2/0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8300044
3.5	0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8350044
4	1	6 x 45 cm	<i>black</i>	8400044
5	2	6 x 45 cm	<i>black</i>	8500044
1.5	4/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8150046
2	3/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8200046
3	2/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8300046
3.5	0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8350046
4	1	17 x 45 cm	<i>black</i>	8400046
1.5	4/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8150060
2	3/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8200060
3	2/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8300060
3.5	0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8350060
4	1	13 x 60 cm	<i>black</i>	8400060
1.5	4/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8150075
2	3/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8200075
3	2/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8300075
3.5	0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8350075
4	1	12 x 75 cm	<i>black</i>	8400075
5	2	12 x 75 cm	<i>black</i>	8500075



Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	250 cm	<i>black</i>	8200025
3	2/0	250 cm	<i>black</i>	8300025
3.5	0	250 cm	<i>black</i>	8350025
4	1	250 cm	<i>black</i>	8400025
5	2	250 cm	<i>black</i>	8500025
6	3&4	250 cm	<i>black</i>	8600025









Round bodied taper point


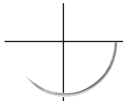

1/2 circle


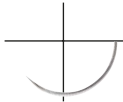





		Metric	USP	Length	Color	Order number
HR 12 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070112
		1	5/0	45 cm	black	8100112
		1.5	4/0	75 cm	black	8150112
HR 16 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070116
		1	5/0	75 cm	black	8100116
		1.5	4/0	75 cm	black	8150116
HR 20 mm		2	3/0	75 cm	black	8200116
		1	5/0	75 cm	black	8100120
		1.5	4/0	75 cm	black	8150120
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	black	8200120
		3	2/0	75 cm	black	8300120
		3.5	0	75 cm	black	8350120
		1	5/0	75 cm	black	8100126
		1.5	4/0	75 cm	black	8150126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	black	8200126
		3	2/0	75 cm	black	8300126
		3.5	0	75 cm	black	8350126
		4	1	75 cm	black	8400126
		2	3/0	75 cm	black	8200130
HR 37 mm		3	2/0	75 cm	black	8300130
		3.5	0	75 cm	black	8350130
		4	1	75 cm	black	8400130
HR 40 mm		5	2	75 cm	black	8500130
		2	3/0	75 cm	black	8200137
		3	2/0	75 cm	black	8300137
HR 45 mm		3.5	0	75 cm	black	8350137
		4	1	75 cm	black	8400137
		5	2	75 cm	black	8500137
HR 55 mm		4	1	75 cm	black	8400140
		5	2	75 cm	black	8500140
		6	3&4	75 cm	black	8600140

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DR 12 mm 	1	5/0	45 cm	<i>black</i> 8100212
	DR 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8100216
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8150216
	DR 25 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200216
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200225
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8300225
	DR 30 mm 	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8350225
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8300230

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
Straight	GR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8302040

 Reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	2 x DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i> 8051512-2
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8071512-2

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i> 8051512
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8071512
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 8101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151512
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201512
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	<i>black</i> 8071512P
	DS 16 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071516
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151516
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201516
3		2/0	75 cm	<i>black</i> 8301516	



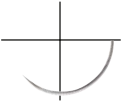












Reverse cutting




			Metric	USP	Length	Color	Order number
DS 16 mm Easy Pass		1	1.5	5/0	4/0	50 cm	<i>black</i> 8101516P
						50 cm	<i>black</i> 8151516P
DS 16 mm black		1	1.5	5/0	4/0	75 cm	<i>black</i> 8101516VB
						75 cm	<i>black</i> 8151516VB
DS 19 mm		0.7	1	6/0	5/0	75 cm	<i>black</i> 8071519
						75 cm	<i>black</i> 8101519
						75 cm	<i>black</i> 8151519
		2	2	3/0	3/0	45 cm	<i>black</i> 8201519-45
						75 cm	<i>black</i> 8201519
						75 cm	<i>black</i> 8301519
						75 cm	<i>black</i> 8351519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	2	4/0	3/0	50 cm	<i>black</i> 8151519P
						50 cm	<i>black</i> 8201519P
DS 19 mm black		1	1.5	5/0	4/0	75 cm	<i>black</i> 8101519VB
						75 cm	<i>black</i> 8151519VB
						75 cm	<i>black</i> 8201519VB
DS 24 mm		1	1.5	5/0	4/0	75 cm	<i>black</i> 8101524
						75 cm	<i>black</i> 8151524
						75 cm	<i>black</i> 8201524
		3	3.5	2/0	0	75 cm	<i>black</i> 8301524
						75 cm	<i>black</i> 8351524
DS 26 mm		2	3	3/0	2/0	75 cm	<i>black</i> 8201526
						75 cm	<i>black</i> 8301526
DS 30 mm		1.5	2	4/0	3/0	75 cm	<i>black</i> 8151530
						75 cm	<i>black</i> 8201530
						75 cm	<i>black</i> 8301530
		3	3.5	2/0	0	75 cm	<i>black</i> 8351530
						75 cm	<i>black</i> 8401530
DS 37 mm		4	5	1	2	75 cm	<i>black</i> 8501530
						75 cm	<i>black</i> 8201537
						75 cm	<i>black</i> 8301537
		2	3.5	3/0	0	75 cm	<i>black</i> 8351537
						75 cm	<i>black</i> 8401537
				75 cm	<i>black</i> 8501537		
				75 cm	<i>black</i> 8601537		





3/8 circle


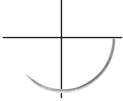



 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Color	Order number
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8301545
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8351545
		4	1	75 cm	<i>black</i>	8401545
		5	2	75 cm	<i>black</i>	8501545
3/8 circle 		4	1	75 cm	<i>black</i>	8401560
		DS 90 mm	3.5	0	100 cm	<i>black</i>
						

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Color	Order number	
1/2 circle 		HS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	8071412
		HS 17 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8101417
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151417
			2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8201417
		HS 20 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151420
			2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8201420
		HS 22 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8101422
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151422
			2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8201422
		HS 26 mm	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8301422
			1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8101426
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151426
			2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8201426
		HS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8301426
			3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8351426
			3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8351436
		4	1	75 cm	<i>black</i>	8401436	

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302140
	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8202160
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302160
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8352160

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 18 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8100518
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200518
	HRT 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200527
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300527

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200418

POLYESTER



Type	Multifilament tressé
Composition	Polyester, un polymère de polyéthylène téréphtalate
Enduit	Silicone
Couleur	Vert Blanc
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

POLYESTER

POLYESTER

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction inégale, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Structure tressée

- ☑ Multifilament enduit

- ☑ Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie orthopédique
Chirurgie gastro-intestinale
Obstétrique

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent et prolongé

Réaction tissulaire minimale

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite

Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie

POLYESTER



Without needle

Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	150 cm	<i>green</i>	7150015
2	3/0	150 cm	<i>green</i>	7200015
3	2/0	150 cm	<i>green</i>	7300015
3.5	0	150 cm	<i>green</i>	7350015
4	1	150 cm	<i>green</i>	7400015
5	2	150 cm	<i>green</i>	7500015
6	3&4	150 cm	<i>green</i>	7600015
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7150045
2	3/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7200045
3	2/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7300045
3.5	0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7350045
4	1	6 x 45 cm	<i>green</i>	7400045
5	2	6 x 45 cm	<i>green</i>	7500045
2	3/0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7350050
4	1	3 x 50 cm	<i>green</i>	7400050
5	2	3 x 50 cm	<i>green</i>	7500050
2	3/0	2 x 75 cm	<i>green</i>	7200075-2



Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	250 cm	<i>green</i>	7150025
2	3/0	250 cm	<i>green</i>	7200025
3	2/0	250 cm	<i>green</i>	7300025
3.5	0	250 cm	<i>green</i>	7350025
4	1	250 cm	<i>green</i>	7400025
5	2	250 cm	<i>green</i>	7500025
6	3&4	250 cm	<i>green</i>	7600025






Round bodied taper point




			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>green</i>	7100116
			1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7150116
			2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7200116
	HR 20 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7150120
			2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7200120
			3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7300120
	HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7150126
			2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7200126
			3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7300126
			3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7350126
			4	1	75 cm	<i>green</i>	7400126
	HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7200130
			3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7300130
			3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7350130
			4	1	75 cm	<i>green</i>	7400130
	HR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7300136
			3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7350136
			4	1	75 cm	<i>green</i>	7400136
	HR 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7350140
			4	1	75 cm	<i>green</i>	7400140
			5	2	75 cm	<i>green</i>	7500140
HR 48 mm		7	5	75 cm	<i>green</i>	7700140	
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7400148	
			5	2	75 cm	<i>green</i>	7500148


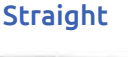






Round bodied taper point double armed






			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HR 17 mm		3	2/0	90 cm	<i>green</i>	7300117-2
			3	2/0	90 cm	<i>green</i>	7300120-2
	2 x HR 20 mm		2	3/0	90 cm	<i>green</i>	7200126-2
			3	2/0	90 cm	<i>green</i>	7300126-2
	2 x HR 26 mm		2	3/0	90 cm	<i>green</i>	7200126-2
			3	2/0	90 cm	<i>green</i>	7300126-2


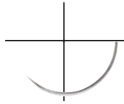









 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle  HR 16 mm HR 36 mm		2	3/0	60 cm	<i>green</i> 7200116-36

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle  DR 50 mm		7	5	75 cm	<i>green</i> 7700250

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
Straight 		1.5	4/0	45 cm	<i>green</i> 7152019
		2	3/0	50 cm	<i>green</i> 7202019

 Round bodied taper cutting point double armed	Metric	USP	Length	Order number		
1/2 circle 		1.5	4/0	90 cm	<i>green</i> 7150517-2	
		2 x HRT 17 mm	2	3/0	90 cm	<i>green</i> 7200517-2
			3	2/0	90 cm	<i>green</i> 7300517-2
					4x <i>green</i> , 4x <i>white</i>	7300517-2P
		2 x HRT 25 mm	2	3/0	90 cm	<i>green</i> 7200525-2
			3	2/0	90 cm	<i>green</i> 7300525-2
			4x <i>green</i> , 4x <i>white</i>	7300525-2P		

 Round bodied taper cutting point	Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i> 7150518
		2	3/0	75 cm	<i>green</i> 7200518
		5	2	75 cm	<i>green</i> 7500540
		8	6	90 cm	<i>green</i> 7800540
		7	5	4 x 75 cm	<i>green</i> 7700555-4

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
	DS 12 mm		1	5/0	45 cm	<i>green</i>	7101512
	DS 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>green</i>	7101516
			1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151516
			2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201516
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>green</i>	7101519
			1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151519
			2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201519
			3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301519
	DS 19 mm black		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151519VB
			2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201519VB
	DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201524
			3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301524
	DS 26 mm		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351524
			3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301526
	DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201530
			3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301530
			3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351530
			4	1	75 cm	<i>green</i>	7401530
			4	1	110 cm	<i>green</i>	7401530-110
	DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301536
4			1	75 cm	<i>green</i>	7401536	
5			2	75 cm	<i>green</i>	7501536	
DS 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351540	
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401540	
		5	2	75 cm	<i>green</i>	7501540	



Reverse cutting


1/2 circle



			Metric	USP	Length		Order number
	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7151417
			2	3/0	75 cm	green	7201417
	HS 20 mm		3	2/0	75 cm	green	7301420
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	green	7201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	green	7201426
			3	2/0	75 cm	green	7301426
	HS 30 mm		3	2/0	75 cm	green	7301430
			3.5	0	75 cm	green	7351430
			4	1	75 cm	green	7401430
	HS 36 mm		5	2	75 cm	green	7501430
			3.5	0	75 cm	green	7351436
			4	1	75 cm	green	7401436
	HS 40 mm		3.5	0	75 cm	green	7351440
			4	1	75 cm	green	7401440
			5	2	75 cm	green	7501440
	HS 48 mm		6	3&4	75 cm	green	7601448
			7	5	75 cm	green	7701448

STEEL

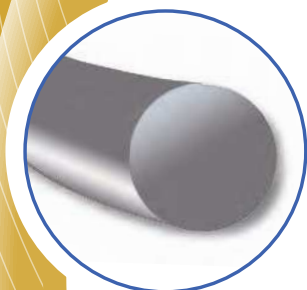MONOFILAMENT



Type	Monofilament
Composition	Alliage de fer, nickel et chrome
Enduit	Aucun
Couleur	Métallique
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

STEEL
MONOFILAMENT

STEEL

MONOFILAMENT

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Ductile et malléable
- ☑ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent et prolongé
- Réaction tissulaire minimale
- Bonne maniabilité
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Fermeture de sternotomie
Chirurgie orthopédique
Fermeture de la paroi abdominale et cures de hernies

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie
Sensibilisation ou allergie connue à l'acier inoxydable ou à l'un des constituants du fil tel que le chrome ou le nickel



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 40 mm



6

3&4

4 x 45 cm

ST45

HRT 48 mm



7

5

4 x 45 cm

ST55

8

6

4 x 45 cm

ST65

HRT 54 mm



7

5

1 x 75 cm

ST54



Reverse cutting

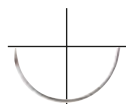
Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HS 25 mm



3.5

0

4 x 45 cm

ST01

HS 40 mm



4

1

4 x 45 cm

ST11

5

2

4 x 45 cm

ST21

HS 48 mm



6

3&4

4 x 45 cm

ST41

9

7

4 x 45 cm

ST71

HS 50 mm



7

5

1 x 75 cm

ST53

7

5

4 x 45 cm

ST51

8

6

4 x 45 cm

ST61

HS 58 mm



7

5

4 x 45 cm

ST52

8

6

4 x 45 cm

ST62

HS 120 mm



9

7

60 cm

ST75



Cutting

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



NH 48 mm



7

5

4 x 45 cm

ST56

8

6

4 x 45 cm


ST63

9

7

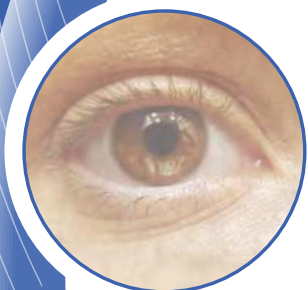4 x 45 cm





ST72


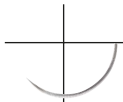












OPHTALMOLOGIE


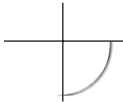

*Pour qualité
&
sécurité*





OPHTALMOLOGIE






 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number	
	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU07
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU061




 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number	
	2 x DSP 5.5 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU102
	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU08-30
			0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU08
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU10
	2 x DSP 6.4 mm 200 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU09
			0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU072
	2 x DSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU071
2 x DSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU062	


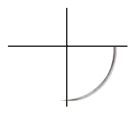


 Side cutting spatula		Metric	USP	Length		Order number	
	DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	10 cm	<i>violet</i>	OSU101
	DSP 6.4 mm 200 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU09-1







 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number	
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU06
	350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU05


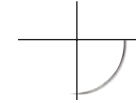


 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
			1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP


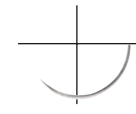





 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
	2 x HSP 8 mm 200 µm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O910061
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O910061U
	2 x HSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O910052





 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
	2 x DSP 11 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O910051



 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O91006
			0.7	6/0	20 cm	<i>undyed</i>	O91006U-20
			0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O91006U
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O91005
			1	5/0	45 cm	<i>undyed</i>	O91005U



 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>black</i>	OS81B
	2 x DSP 6.5 mm 240 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	OS71
			0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	OS61
2 x DSP 8 mm 350 µm		1	5/0	30 cm	<i>black</i>	OS52	



 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
	2 x VSP 8 mm 250 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	OS62
	2 x VSP 10 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	OS51



 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number			
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	8071512
			1	5/0	45 cm	<i>black</i>	8101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151512
	DS 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151516
	DS 19 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151519








 Reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number			
	2 x DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	8051512-2
			0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	8071512-2


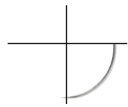

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/4 circle  2 x VR 8 mm 220 µm	0.4	8/0	45 cm	<i>black</i> ON81


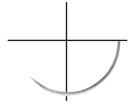

 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle  HSP 5.5 mm 150 µm	0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON1081

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
2 x HSP 5.5 mm 150 µm	0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON108
1/2 circle  2 x HSP 6.2 mm 150 µm	0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON102
2 x HSP 6.4 mm 220 µm	0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON106
2 x HSP 8 mm 300 µm	0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> ON62

 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  DSP 6.2 mm 150 µm	0.2	10/0	15 cm	<i>black</i> ON1011

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON103
			0.1	11/0	20 cm	<i>black</i>	ON111
			0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON101
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>black</i>	ON95
			0.3	9/0	45 cm	<i>black</i>	ON95-45
			0.4	8/0	30 cm	<i>black</i>	ON85
			0.4	8/0	45 cm	<i>black</i>	ON85-45
	2 x DSP 6.2 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>black</i>	ON75
	2 x DSP 6.4 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON105
			0.2	10/0	38 cm	<i>black</i>	ON105-38
		0.2	10/0	45 cm	<i>black</i>	ON105-45	
2 x DSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	ON61	

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	ON51

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
			0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle  2 x HSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP52	
3/8 circle  2 x DSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP53	
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 250 µm 	0.5	7/0	45 cm	<i>white</i> OP71
	2 x VSP 8 mm 300 µm 	0.7	6/0	45 cm	<i>white</i> OP61
	2 x VSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP51
	2 x VSP 8 mm 350 µm 	1.5	4/0	45 cm	<i>white</i> OP41

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  2 x DSP 6.4 mm 200 µm	0.2	10/0	30 cm	<i>blue</i> OPP105
	0.3	9/0	30 cm	<i>blue</i> OPP95
 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  DSP 6 mm 200 µm	0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i> OPP71-1
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/4 circle  2 x VSP 8 mm 300 µm	0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i> OPP62
 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
1/4 circle  VSP 16 mm 150 µm	0.2	10/0	10 cm	<i>blue</i> OPP103
 Side cutting spatula loop	Metric	USP	Length	Order number
1/4 circle  VSP 15.3 mm 150 µm	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP113L-2
	VSP 16 mm 150 µm	0.2	10/0	20 cm

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
Straight  2 x GSP 16.15 mm 150 µm	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP101
	0.3	9/0	20 cm	<i>blue</i> OPP91
 Side cutting spatula loop	Metric	USP	Length	Order number
Straight  GSP 16.15 mm 150 µm	0.2	10/0	15 cm	<i>blue</i> OPP110
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
Straight  GSP 16 mm 150 µm	0.2	10/0	10 cm	<i>blue</i> OPP102



AUTRES ARTICLES

*Pour qualité
&
sécurité*

Agrafeuse chirurgicale cutanée & ôte-agrafes

INDICATIONS:

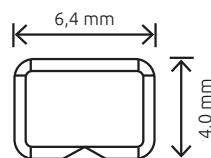
L'agrafeuse chirurgicale cutanée SMI peut être utilisée pour diverses fermetures de peau.

AVANTAGES:

- ☑ *Design ergonomique et manipulation aisée*
- ☑ *Vue dégagée sur le champ opératoire*
- ☑ *Facilité de vérifier le nombre d'agrafes restantes*

1. agrafeuse chirurgicale avec 35 agrafes
2. ôte-agrafes à usage unique
3. ôte-agrafes à usage unique 2

Staple size



ZS35W
ZSR
ZSR2

Biopsy Punch

Punch à biopsie dermique stérile pour des prélèvements précis et sûrs

Bordure très tranchante en acier inoxydable sans soudure

Manche cranté qui assure une bonne préhension de l'instrument



Ø 2 mm	25 pc.	ZBP2
Ø 3 mm	25 pc.	ZBP3
Ø 4 mm	25 pc.	ZBP4
Ø 5 mm	25 pc.	ZBP5
Ø 6 mm	25 pc.	ZBP6
Ø 8 mm	25 pc.	ZBP8
Ø 10 mm	20 pc.	ZBP10
Ø 12 mm	20 pc.	ZBP12

Support pour matériel de suture en pochettes

Support & tiroir pour support



Le système de support flexible permet un rangement ordonné des sutures en pochettes. Le matériel reste ainsi facilement accessible pendant l'opération.

Différentes combinaisons sont possibles avec des pièces interchangeables.

1 support pour 2 boîtes à pochettes horizontales (125 mm x 72 mm x 143 mm) Z070

tiroir pour support Z071

Treillis de polypropylène

INDICATIONS:

solution de renforcement de la paroi abdominale

- hernie
 - éventration
- par cœlioscopie ou laparotomie

COMPOSITION:

treillis élastique et durable de polypropylène monofilament

AVANTAGES:


- ✓ *Stabilité dimensionnelle extrême*
- ✓ *Structure du treillis très fine*
- ✓ *Porosité idéale*
- ✓ *Transparence excellente*
- ✓ *Bonnes propriétés de manipulation*
- ✓ *Facile à couper*
- ✓ *Bien toléré*

Treillis carrés et rectangulaires

STANDARD MESH

5 pc.

5 cm x 10 cm	ZMS0510
6 cm x 11 cm	ZMS0611
7.5 cm x 15 cm	ZMS07515
10 cm x 15 cm	ZMS1015
15 cm x 15 cm	ZMS1515
30 cm x 30 cm	ZMS3030

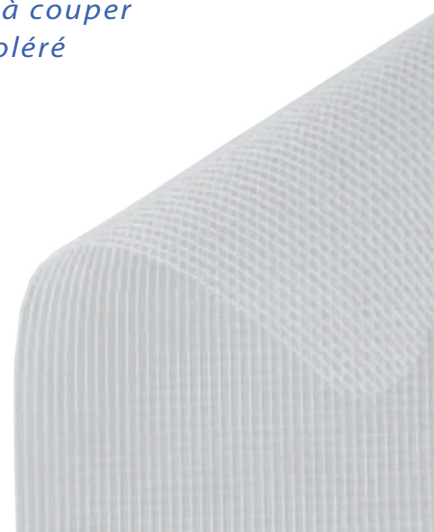

Pilomat

Ecraseur de comprimés Z045

Pour écraser les comprimés en tour de main.



Coupe-comprimés Z044

Pour couper les comprimés de toute un simple taille en deux.



Lames chirurgicales et bistouris

Pour manche
de bistouri N° 3



N° 10 N° 11 N° 12 N° 12d N° 15 N° 15c

lames de bistouri
sans manche

ZB10 ZB11 ZB12 ZB12d ZB15 ZB15c

bistouris jetables avec
manche en plastique

ZBD10 ZBD11 ZBD12 ZBD15

Pour manche
de bistouri N° 4



N° 18 N° 20 N° 21 N° 22 N° 23 N° 24 N° 25

lames de bistouri
sans manche

ZB18 ZB20 ZB21 ZB22 ZB23 ZB24 ZB25

bistouris jetables avec
manche en plastique

ZBD20 ZBD21 ZBD22 ZBD23 ZBD24



COMPOSITION:
acier de carbone

PRESENTATION:
pochettes individuelles stériles

sans manche 100 / boîte
avec manche en plastique 10 / boîte

Coupe-fils



ZBS

Manche de bistouri

COMPOSITION: acier inoxydable

PRESENTATION: 10/ boîte



N° 3 ZBH3



N° 4 ZBH4

Marqueur pour la peau

Pour marquage général de la peau. Encre violet de gentiane indélébile. Biocompatible, non toxique et non irritant. Avec règle en centimètres et en pouces.

ZSM 20 double pointe, marqueur à pointe régulière et fine avec règle, stérile



Cire à os



12 x 2.5 g

Z046

COMPOSITION:

Cire d'abeille blanc raffinée, paraffine et palmitate d'isopropyle

INDICATIONS:

contrôle des saignements des surfaces osseuses en agissant comme barrière mécanique

PRESENTATION:

une pièce de 2.5 g par pochette stérile, boîtes de 12

SMI Spon

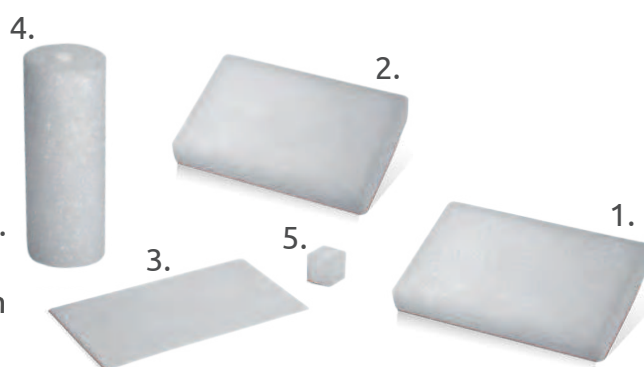
Éponge de gélatine résorbable

COMPOSITION:

Gélatine de première qualité hautement purifiée

INDICATIONS:

Pour usage dans diverses procédures chirurgicales. Prévue pour être utilisée à des fins hémostatiques par application sur une surface hémorragique. Non pyrogène et biocompatible.



1. STANDARD	80 x 50 x 10 mm	ZHG805010
2. REGULAR	70 x 50 x 10 mm	ZHG705010
3. SPECIAL	80 x 50 x 1 mm	ZHG805001
4. TAMPON	80 x 30 mm DIA	ZHG8030
5. DENTAL CUBE	10 x 10 x 10 mm	ZHG101010

Aiguilles

12 dans une boîte

1/2 cercle



chas fermé
GN



chas à
ressort GF



chas fermé
GRN



chas à
ressort GRF



90 mm N°00		Z 751		Z 850
80 mm N°1	Z 702	Z 752		Z 851
70 mm N°2	Z 703	Z 753		Z 853
65 mm N°3	Z 704			
60 mm N°4		Z 755		Z 855
55 mm N°6	Z 706	Z 756	Z 806	Z 856
50 mm N°7		Z 758	Z 807	Z 858
48 mm				Z 840
45 mm N°8	Z 708	Z 759	Z 808	Z 859
40 mm N°9	Z 710	Z 760	Z 810	Z 860
37 mm		Z 746		
35 mm N°10	Z 711	Z 761	Z 811	Z 861
32 mm N°11		Z 745		
30 mm N°12	Z 712	Z 762	Z 812	Z 862
25 mm N°13	Z 713	Z 763	Z 813	Z 863
20 mm N°15	Z 714	Z 764	Z 814	Z 864
16 mm N°16		Z 766		Z 866

AIGUILLE SERPENTINE



chas fermé GSN



145 mm

Z 402

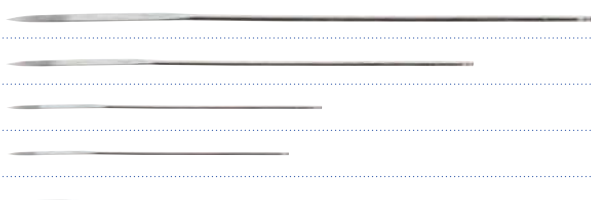
135 mm

Z 401

110 mm

Z 403

AIGUILLE DROITE



chas fermé
GSN



chas à
ressort GSF



75 mm N° 1

Z 904

60 mm N° 4

Z 903

Z 913

45 mm N° 8

Z 902

40 mm N° 9

Z 912









35 mm N° 10

Z 911




3/8 cercle



	 chas fermé BN		 chas à ressort BRN		 chas fermé BRT
					
200 mm	Z 400				
130 mm N°6-0	Z 495		Z 595		
110 mm N°4-0			Z 599		
100 mm N°000	Z 500	Z 550		Z 650	
90 mm N°00	Z 501	Z 551	Z 601	Z 651	Z 301
90 mm LIGHT N°00	Z 502		Z 602		
85 mm N°0			Z 590		
80 mm N°1	Z 503	Z 552	Z 591		Z 303
70 mm N°2	Z 504	Z 553	Z 603	Z 653	
70 mm LIGHT N°2	Z 504L				
65 mm N°3			Z 604		
60 mm N°4	Z 505	Z 555		Z 655	
57 mm N°5	Z 506		Z 605		
55 mm N°6		Z 556		Z 656	
50 mm N°7		Z 557	Z 607	Z 657	
45 mm N°8	Z 508	Z 558	Z 608	Z 658	
40 mm N°9	Z 510	Z 560	Z 610	Z 660	
35 mm N°10	Z 511	Z 561	Z 611	Z 661	
32 mm N°11		Z 570		Z 670	
30 mm N°12	Z 512	Z 562	Z 612	Z 662	
25 mm N°13	Z 513	Z 563	Z 613	Z 663	
22 mm N°14		Z 571		Z 671	
20 mm N°15	Z 514	Z 564	Z 614	Z 664	
16 mm N°16	Z 516	Z 566		Z 666	
14 mm N°17		Z 567		Z 667	
12 mm N°20		Z 568		Z 668	

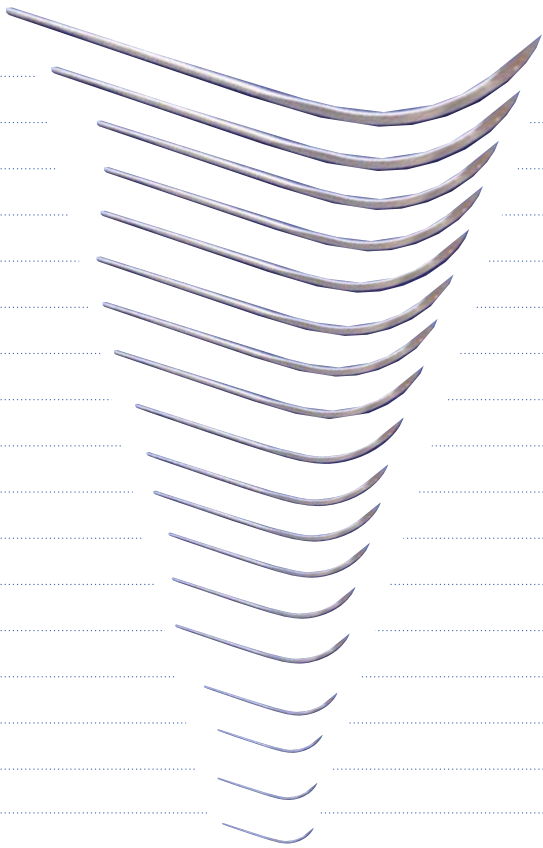AIGUILLE CORDEE (SKI)




chas fermé chas à ressort



80 mm N°1	Z 202	
70 mm N°2	Z 203	
65 mm N°3	Z 204	
60 mm N°4	Z 205	
57 mm N°5	Z 201	
55 mm N°6	Z 206	
50 mm N°7	Z 207	
45 mm N°8	Z 208	
40 mm N°9		Z 260
35 mm N°10		Z 261
32 mm N°11		Z 270
30 mm N°12		Z 262
25 mm N°13		Z 263
22 mm N°14		Z 271
20 mm N°15		Z 264
16 mm N°16		Z 266
14 mm N°17		Z 267
12 mm N°20		Z 268

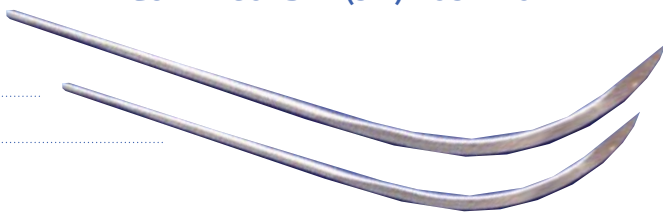AIGUILLE CORDEE (SKI) POST MORTEM



chas fermé



130 mm 5"	Z 281
100 mm 4"	Z 282

AIGUILLE 3/8 CERCLE POST MORTEM



chas fermé



150 mm 6"	Z 480
130 mm 5"	Z 481
100 mm 4"	Z 482