


Système de Rétraction pour Petits Animaux – Réf. VET18-7220

Système complet comprenant une plaque de base magnétique (310 × 290 mm) avec surface antireflet et zone centrale douce pour l'animal.

Compatible avec coussins chauffants et masques d'anesthésie.

Livré avec fixateurs ajustables, rétracteurs atraumatiques et fils de rétraction pour une installation rapide et modulable.

- 2 × Fixateurs courts – Réf. 18-7221
- 2 × Fixateurs hauts – Réf. 18-7222
- 4 × Rétracteurs émoussés, embout 2,5 mm – Réf. 18-7230
- 4 × Fils de rétracteurs courts, 14 cm – Réf. 18-7225
- Fabriquée en acier inoxydable magnétique
- Plaque centrale en plastique (12 × 20,5 cm) pour un contact doux avec l'animal
- Option d'ajout de coussins chauffants pour maintenir la température corporelle
- Support frontal pour masques concentriques d'anesthésie par inhalation

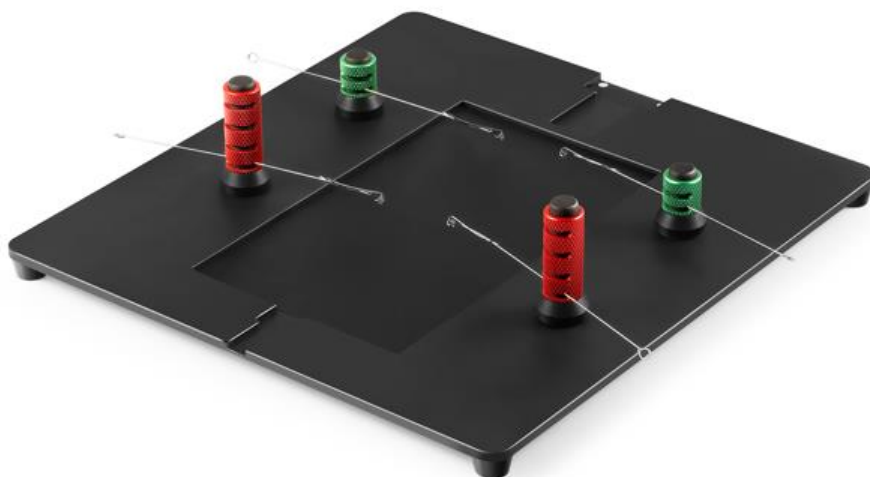

Fixateurs

- En aluminium anodisé, avec aimant en terre rare de qualité chirurgicale
- Fixation libre sur toute la plaque de base
- Disponibles en deux hauteurs pour s'adapter à différents animaux et sites chirurgicaux
- Verrouillage à ressort activé par bouton-poussoir
- Compatibles avec fils rétracteurs et rétracteurs en élastomère à chaîne de billes
- Rétracteurs
- 5 tailles d'embouts disponibles, interchangeables et personnalisables
- Option : **rétracteurs en élastomère à chaîne de billes** pour fixer les pattes ou rétracter les incisives



Numéro	Référence	Description
1	18-7220	Système de rétraction pour petits animaux
2	18-7221	Fixateurs magnétiques courts – 4 cm
3	18-7222	Fixateurs magnétiques longs – 6 cm :
4	18-7225	Fils de rétracteurs courts – 14 cm (lot de 10)
5	18-7226	Fils de rétracteurs longs – 16 cm (lot de 10)
6	18-7227	Plaque seule 310 x 290mm
7	18-7228	Rétracteurs à pointe fine – 1 mm (lot de 10)
8	18-7229	Rétracteurs à embout émoussé – 1 mm (lot de 10 pièces)
9	18-7230	Rétracteurs à embout émoussé – 2.5 mm (lot de 10 pièces)
10	18-7231	Rétracteurs à embout émoussé – 7.5 mm (lot de 10 pièces)
11	18-7233	Chaîne élastomère à billes pour incisive – Lot de 10
12	18-7234	Chaînes élastomères à billes pour les pattes – Lot de 10 pièces
13	10-2159	Support pour masques cylindrique

